


Lätt att avlägsna


Överlägset enkelt

Bindningsstyrkan är välbalanserad för att hålla fast brackets, band och apparatur under hela behandlingen, men också för att undvika skador på emaljen när apparaturen tas bort. Den naturligt fuktiga orala miljön bidrar också till att upprätthålla bindningsstyrkan under hela behandlingsperioden.

Bindningsstyrka med brackets

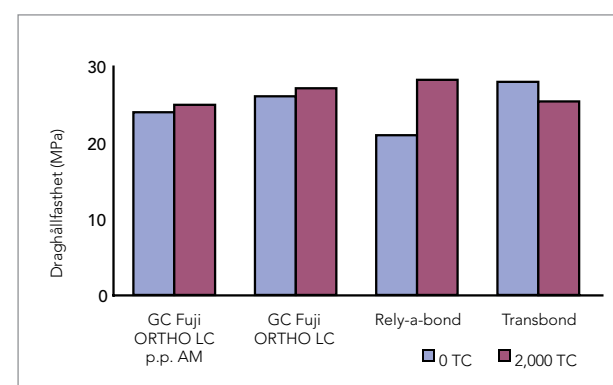

Bindningsstyrka med band

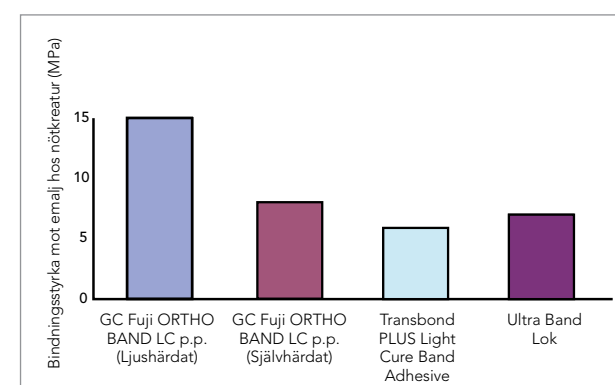

GC R&D Interna data, Japan

Överlägset resultat

Omedelbart efter avlägsnande av brackets med Fuji ORTHO LC



Den konstanta fluoravgivningen hjälper till att skydda emaljen

Omedelbart efter avlägsnande av brackets bondade med resinbaserat cement



Otillräcklig fluorskydd för att förhindra vita fläckar

GC Fuji ORTHO familjen

Kemiskt härdande



Fuji ORTHO

Pulver/Vätska
Introduktionsförpackning:
40 g pulver, 2 x 6.8 ml vätska
Refillförpackning:
40 g pulver, 6.8 ml vätska



Fuji ORTHO Band Paste Pak

Refillförpackning:
2 x 13.3 g, 7.2 ml
Paste Pak patron med blandningsblock

Ljushärdande



Fuji ORTHO LC

Pulver / Vätska
Introduktionsförpackning:
15 g pulver, 6.8 ml vätska
Refillförpackning:
40 g pulver, 6.8 ml vätska
Kapslar
50 kapslar
(blandad mängd per kapsel 0.10 ml)



Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Refillförpackning:
2 x 13.3 g, 7.2 ml Paste Pak patron med blandningsblock
Startförpackning:
1 x 13.3 g, 7.2 ml Paste Pak patron,
20 x blandningsspetsar LC,
2 x ORTHO Gel Conditioner,
15 penslar



Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix

Refillförpackning:
2 x 13.3 g, 7.2 ml
Paste Pak patron med blandningsblock

Relaterade produkter



Paste Pak Dispenser



Capsule Applier



ORTHO Conditioner



ORTHO Gel Conditioner



GC blandningsspetsar LC

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Kungporten 4 A
S - 427 50 Billdal
Tel. +46 31 939553
Fax. +46 31 914246
info@nordic.gceurope.com
http://nordic.gceurope.com

z L LF SV 2.42 02/11

Enkelt på plats –
Lätt att avlägsna
Bonda enkelt med GC.



Fuji ORTHO
från GC.

Med kombinationen av fluoravgivning, enkel hantering och med en optimal bindningsstyrka får ni vad som behövs för tandreglering. Fuji ORTHO familjen - överlägsna lösningar som ger förutsägbara kliniska resultat och nöjda patienter.

Enkelt på plats

De resinmodifierade glasjonomererna inom Fuji ORTHO familjen erbjuder **överlägsna resultat**, tack vare den **enkla appliceringen** av brackets och band. Fluoravgivningen och det **bekymmersfria avlägsnandet** av desamma garanterar samtidigt nöjda patienter.

Överlägsen applicering

Den "enkla" proceduren som Fuji ORTHO produkterna ger garanteras av att det inte är något behov av vare sig emaljetsning eller upprätthållande av en helt torr appliceringsyta. Dessa egenskaper säkerställer att kliniker inte slösar vare sig tid eller material under behandlingen.

Så här gör du



Placera det cementtäckta bracket på tanden men dehydrera inte tandytan.



Snabbhärdade under 5 sekunder och ta bort överskott med en scaler.



Slutligen ljushärda varje yta under 20 sekunder.

Dr. A. Komori, Japan

Överlägset skydd

Eftersom det inte finns något behov av syraetsning så skadas inte tänderna. För extra skydd och bindningsstyrka använd ORTHO Gel Conditioner under 10 sekunder för att försiktigt konditionera emaljen.




Rengör och polera tandytan noggrant



Applicera Fuji ORTHO Gel Conditioner

Dr. A. Komori, Japan

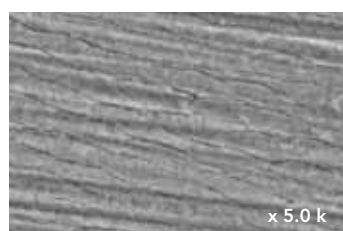


Snittyta av en tand som är konditionerad med ORTHO Gel Conditioner



Snittyta av emalj efter syraetsning

GC R&D Interna data, Japan

Fluoravgivning

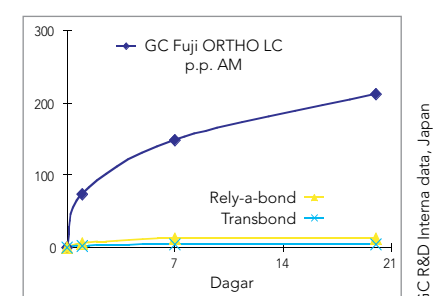

Glasjonomer både avger och tar upp fluor. Denna inneboende egenskap hjälper till att skydda emaljen bredvid brackets och band genom att skapa en zon på tanden som därmed inte demineraliseras. Detta reducerar tydligt risken för vita fläckar som kan uppkomma under denna typ av behandling.

Egenskaper & Fördelar	Kemiskt härdande		Ljushärdande			
	Fuji ORTHO Pulver / Vätska		Fuji ORTHO LC Pulver / Vätska		Fuji ORTHO LC Kapsel	
Pulver / Vätska Här bestämmer du själv hur mycket cement som ska blandas till						
Kapslar Snabbt och enkelt för direkt applicering Här får du garanterat en produkt med korrekt P/V-tal						
Pasta / Pasta form Enkelt att dosera och blanda, utan luftinneslutningar Fritt val av kvantitet, men alltid i korrekta relationer		Fuji ORTHO Band Paste Pak			Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix	Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix
Blandningstid	30"	15"	30"	10"	Ingen	15" / ingen
Arbetstid	2'50"	3'30"	3'15"	3'00"	5'00"	3'30"
Stelningstid	3'00"	3'00"	20"	20"	20"	20"
Filmtjocklek	23 μ	3 μ	24 μ	30 μ	18 μ	3 μ

