
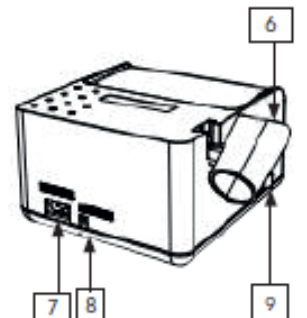


PRODUKT

1. Strömindikator
2. Handstyckets-anslutning
3. Hastighetsregulator
4. Rotationsriktningsknapp
5. Strömbrytare On/off
6. Handstyckesstativ
7. Strömkabel anslutning
8. Fotpedalsanslutning
9. Knapp för val av hand/fotpedal.

STRONG SERIES
STRONG B35

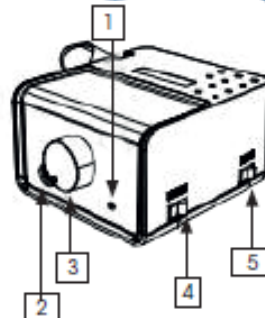

Handstycke av DC Typ 'Strong 102L' Applikation

Valbar rotationsriktning (för både höger & vänsterhänta)

Överbelastningsskyddsfunktion

Använd standardborr $\varnothing$ 2,35 mm

Max. 40 000 rpm

Spännhylsa Chuck Typ

Max. 3 N-cm

Fotpedal

KNAPPAR PÅ DRIFTPANELEN

(5): Denna omkopplare används för att slå på eller stänga av strömmen.

(3): Denna ratt används för att styra RPM. Vrid medurs, varvtalet ökar. Vrid moturs, varvtalet minskar

(4): Denna omkopplare används för att välja rotationsriktning på borren, medurs eller moturs.

(9): Denna omkopplare används för att välja handstycke operationsmetod. Hand: Handstycket manövreras genom att vrida på rattan. Fot: Handstycket manövreras med fotpedalen. Fotpedalen styr endast om handenheten är på eller av.

ANSLUTNING AV VARJE DEL

1. Anslut nätsladden till eluttaget.
 - Innan strömmen ansluts se till att kontrollera att strömmen är avstängd. • Se till att kontrollera att hastigheten kontrollratten är inställd på '0'.
2. Anslut fotpedalens sladd.
3. Anslut handstyckets sladd.

SÄTT I BORR

1. Vrid på handtaget för att öppna chucken för handstycket.
2. Sätt in borren i den främre delen av handstycket.

3. Lås chucken för handstycket genom att vrida på handtaget.

Se till att låsa chucken före användning.

- Det kan orsaka skada på handenheten.
- Se till att borren inte är skadad.
- Kontrollera borrdimensionen.

(Borrdimension: Ø 2,35 mm)

DRIFTPROCESS

1. Sätt upp handstycket och slå på strömbrytaren (5) .
2. Välj operationsmetod genom att trycka på hand/fotväljaren (9).
3. Välj rotationsriktning genom att trycka på rotationsriktnings knappen (4)
4. Styr önskad hastighet genom att vrida på
Hastighetsreglage (3).
5. Manövrera handstycket genom att trycka på
fotkontroll. Förutsätter att Knappen för val av fot/hand (9) är tillslagen.
6. Fotpedalen släpps, handstycket stannar.

ÖVERBELASTNINGSSKYDD

Om handstycket är överbelastat blir handstycket långsamt eller stannar. För att använda handstycket igen, stäng av det och vila minst 5minuter. Om handstycket blir varmt under överbelastning finns det risk att motorn och andra delar skadas.

UNDERHÅLL AV PRODUKTEN

Håll platsen runt handstycket ren från damm och slipning. Avlägsna damm på handstycket med alkohol och undvik fukt i närheten. Produkten är mycket känslig mot vätska. - Använd inte olja och vattnet till produkten. - Fettet inuti lagret kan smälta bort på grund av oljan. Luftrening är acceptabelt men lufttrycket kan påverka handstykke eller motor. Förvara produkten med en borr fixerad vid hylsan

TEKNISK DATA

Modell B135

Strömdata Ingång: 220-240V ~50/60Hz

Strömdata Säkring: 250V 2A

Förbrukning 16W

Säkring T2AL (2A)

Max RPM 40.000 rpm

Denna apparat överensstämmer med direktiv 2014/35/EU om elektrisk säkerhet för utrustning för hushållsbruk, till direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk utrustning kompatibilitet och till RoHS-direktivet 2011/65/EU och efterföljande ändringar och tillägg, om begränsning av farliga ämnen i elektriska och elektronisk utrustning.

FÖRFOGANDE

Produktförpackningen är gjord av återvunnet material. Dela upp materialen efter typ och kassera dem enligt ström och miljöskyddslagar.

Denna produkt överensstämmer med EU-direktiv 2012/19/EU.

WEEE| Denna symbol betyder att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall i alla EU-länder. Att undvika skada miljön eller människors hälsa, till följd av okontrollerad bortskaffande av avfall, återvinna produkten på ett förnuftigt sätt för att främja hållbar användning av materiella resurser. Kontakta återförsäljaren där produkten köptes, om något är oklart.

VARNING

Elektromekanisk apparat för skönhetsterapi och nageldesign. Skall inte används för medicinska ändamål.

- Använd inte i produkten när spännhylsan är öppen.
- Öppna inte spännhylsan medan handstycket manövreras.
- Kontrollera strömbrytaren innan du ansluter nätsladden för att minska risken vid plötslig användning av produkten.
- Anslut nätsladden efter att ha ställt in hastighetsratten på '0'-platsen (den skall vridas moturs till 0).
- En säkring tillhandahålls för att skydda motorn. Den aktiveras när en överbelastning uppstår som motorn inte tål.
- Förvara alltid produkten med en borr i och fixerad vid spännhylsan.
- Ändra rotationsriktning först när handstycket har stannat.
- Använd inte en skadade borr. Det kan orsakar skada och olycka.
- Arbeta inte på en farlig plats. Använd inte kontrollboxen på en fuktig plats.
- Ta inte isär eller modifiera produkten som du vill. Det orsakar olycka.
- Använd det kompatibla handstycket och fotpedalen med kontrollbox.
- Kontrollera problemen om det blir överdriven vibration av borr, defekt hastighetskontroll och etc.
- Hantera hastighetsreglaget försiktigt.
- Byt ut borren efter att handstycket stoppats.

- Var försiktig så att du inte tappar produkten eftersom den kan bli skadad och gå sönder. Om den tappas, kontrollera om borsten är böjd eller att någon överhettning genereras när den används försiktigt.
- Lägg inte ner handenheten innan det stannat helt.
- Använd lämplig spänning för produkt.
- Använd lämpliga tillbehör för produkten.
- Det är att föredra att använda engångsinstrument eller, efter användning, att sterilisera dem innan de återanvänds på en annan klient.
- Använd lämpliga medel för att skydda operatören från någon förorening (t.ex. handskar, skyddsglasögon, mask etc.).
- Behåll arbetsplatsen ren. Skräp kan orsaka en olycka.

VARNING

Lämplig sterilisering och/eller desinfektion av alla delar som kommer i kontakt med klienten som ska behandlas rekommenderas.

- Rör inte vid nätsladden och handstyckets sladd med våt hand.
- Böj eller tryck inte på nätsladden överdrivet. Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Placera inte produkten i närheten av värmekälla. Det kan orsaka brand.
- Om du använder förlängningen sladd, använd inte många elektriska enheter samtidigt. Det kan orsaka brand eller el-chock.
- Ha kvar apparaten och dess nätsladd utom räckhåll för barn.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring, användning och underhåll får inte utföras av barn.
- Om leveransen orsakar skada på någon del av produkten, måste den delen ersättas/repareras av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Följ användarmanualen för att använda slipmaskinen. Håll den rekommenderade hastigheten som rekommenderas för slip/borsten.
- Om hastighetsgränsen överskrids kan det hända orsaka en olycka.