

TIPS FÖR RENGÖRING AV VETERINÄRENS KLIPPSKÄR!



INFEKTERADE SKÄR



Skären behöver monteras isär helt innan rengöring. Skruvar, glidskenor, fjädrar etc desinficeras med alkohol, diskas och torkas. Ska delarna autoklaveras så behöver ev oljerester avlägsnas först, eftersom oljan bränner fast i autoklaven. Om du efter desinficering får problem med att montera ihop skäret så hjälper vi till. Vi rekommenderar att du då lägger delarna i en burk och skickar till oss.

DU BEHÖVER:
KRYSSMEJSEL PH2
TORX T8,T9,T20
SPÅRSKRUVMEJSEL

Om du skickar skär till oss,
märk dem tydligt så tar vi
hand om dem och eventuellt
saknade delar ersätts.

SMUTSIGA SKÄR

Klassiska Osterskär, så kallade Snap-On



För att komma åt med borste, tryck överskåret en bit åt sidan utan att lossa det helt.

Var försiktigt - tänderna är vassa!

Rengör skäret grundligt med hett vatten och diskmedel.

Upprepa samma procedur med överskåret tryckt åt andra sidan.

Skäret kan även diskas i maskin.



Avslutningsvis - Torka med tryckluft eller lägg skäret på en varm plats tills all fukt är borta.

Om överskåret skulle lossna helt så behöver skäret skruvas isär och återmonteras. Detta kan vara svårt, så skicka då skäret till oss så löser vi det.

“

Korrekt slipning och underhåll är grundförutsättningen för en fungerande klippmaskin och andra skärande verktyg. Tekniken har utvecklats genom århundraden och är i sig ett hantverksarbete som vi utför med yrkeskunnande och stolthet.

SMUTSIGA SKÄR


Klassiska Osterskär, så kallade Snap-On



Desinficera med alkohol



Olja skäret : Flaska eller spray

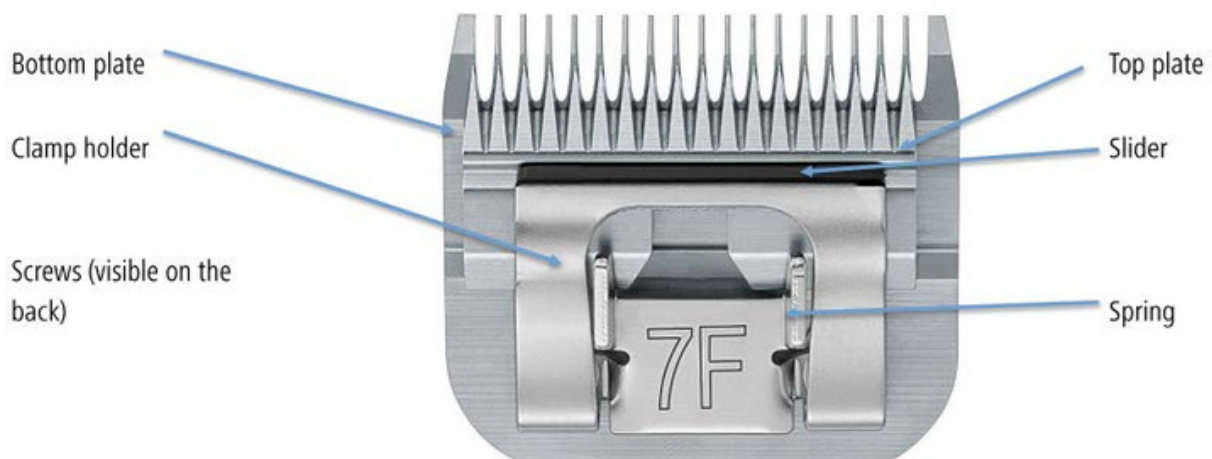

SMUTSIGA SKÄR

Klassiska Aesculap-skär



Ta loss överskåret genom att lossa ställskruven helt.



Rengör med borste eller tryckluft.



Rengör grundligt med hett vatten och diskmedel.

Skäret kan även diskas i maskin.

Avslutningsvis - Torka med tryckluft eller lägg skäret på en varm plats tills all fukt är borta.

SMUTSIGA SKÄR


Klassiska Aesculap-skär



Desinficera med alkohol



Olja skären med flaska eller spray

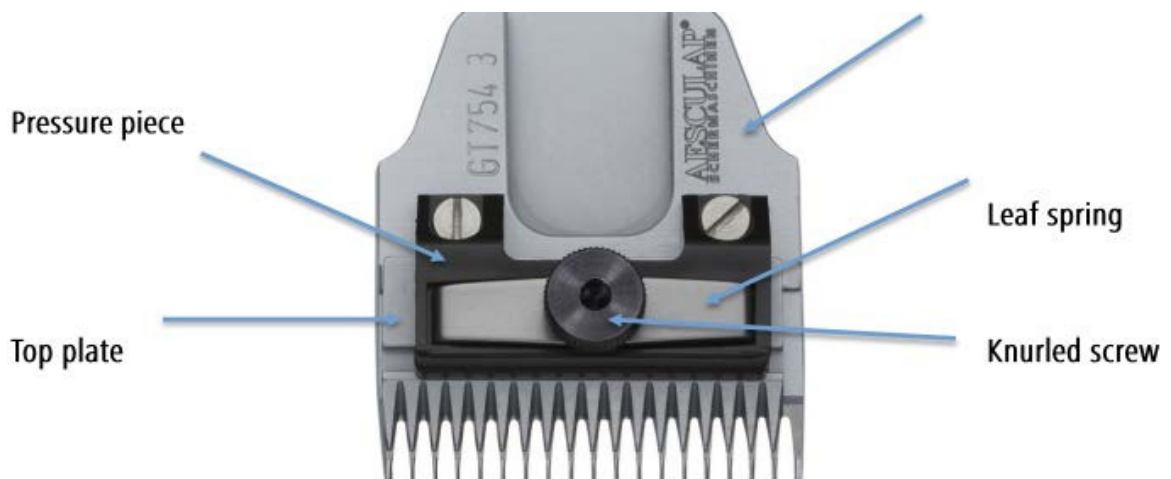

SMUTSIGA SKÄR

Moderna specialsår

Det finns idag många olika typer av trimmers med egna specialsår. Många av dessa skår är industriellt monterade av maskiner. Montera inte isår dem! De är ofta snudd på omöjliga att få ihop igen.

Tips på hur du kan rengöra sådana skår:



Lyft överskåret genom att föra in en smal tandpetare eller liknande mellan över- och undersår. Pinnen får inte vara för tjock, den ska gå emellan med lite kraft.



Diska hela skåret riktigt hett. Viktig att smutsen släpper.

Torka med tryckluft och/eller låt ligga länge på varm plats. Det finns ofta många skrymslen på de här skårtyperna, som behöver bli helt torra.



Olja skåret med oljespray och torka av överflödig olja.

BRA ATT HA HEMMA!

Kryssmejsel PH2

Torx: T8,T9,T20

Spårskruvmejsel

Skärolja

Fett

Desinfektionsmedel

Rengöringsborste

(t.ex. en tandborste)

Lyckliga Fåret Skärsliperi I Höganäs

www.lyckliga.nu

Telefon: 042-722 83

info@lyckliga.nu

Besöksadress:

Prästavägen 254

263 91 Höganäs



**Lyckliga Fåret
skärsliperi**

www.lyckliga.nu