

GeniX ROM - Knieorthese

ART.NR 70646

Postoperative Knieorthese; zur Verwendung nach einer Verletzung oder Operation am Kniegelenk, wenn ein kontrollierter Bewegungsradius oder eine vollständige Ruhigstellung des Kniegelenks erforderlich ist. Die Orthese wurde entwickelt, um ein schnelles und einfaches Anpassen nach einer Verletzung/Operation zu ermöglichen. Das Leichtgewicht GeniX ROM lässt sich angenehm tragen.

Dank des Teleskopmechanismus lässt sich die Länge der Orthese von ca. 45 cm bis 64 cm in Schritten von 0,8 cm einstellen. Die modellierbaren Schienen und Manschetten können individuell an den Patienten angeformt werden. Alle Manschetten sind positionierbar. Die silikonbeschichteten, weichen Kondylenpolster schränken ein Verrutschen der Orthese ein. Kürzbare Bänder mit Schnellverschlüssen erleichtern das Anpassen, sowie dem Patienten das selbständige An- und Ausziehen.

Der Bewegungsradius kann für die Extension von -10° bis 90° und für die Flexion von 0° bis 120° eingestellt werden, jeweils in 10° -Schritten. Die ROM-Einstellung verbleibt sicher, auch während des Gebrauchs. Eine Schnellverriegelung am Gelenkgehäuse fixiert den Bewegungsbereich in Intervallen von -10° bis 30° .

Indikationen: Postoperative und posttraumatische Immobilisierung/Stabilisierung des Kniegelenks.

Kontraindikationen: Nicht geeignet für Personen mit einem Körpergewicht >110 kg.

Material: Aluminium, Polyoxymethylen, Polyamid, Polyurethan, Viskose, Elastan, Silikon. Latexfrei.

Waschanleitung: Textilpolsterung - Feinwäsche bei 40°C . Für optimale Haltbarkeit wird Handwäsche und flach liegend trocknen empfohlen.

Schienen und Gelenke - Mit Tuch und warmem Wasser/mildem Desinfektionsmittel abwischen.


Größe	Art. Nr.
GeniX ROM Universal	706460050
Zubehör	Art. Nr.
GeniX ROM Straps	706460054
GeniX ROM Padding	706460055



Modellierbare Alu-Manschetten für passgenauen Sitz am Bein.



Riemen mit Schnellverschluss.

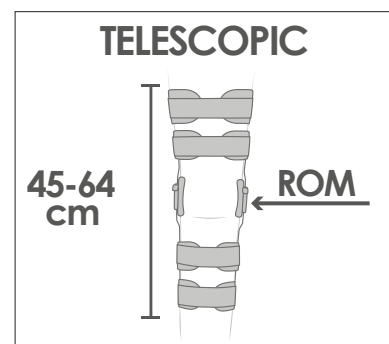

MD Class I CE