
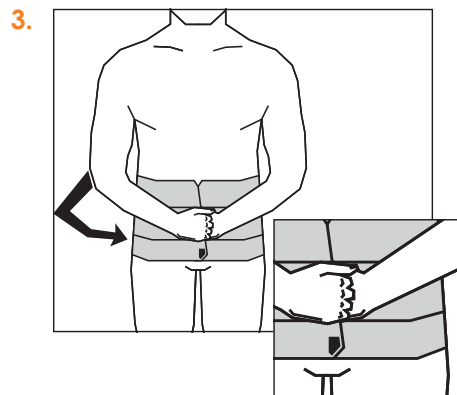
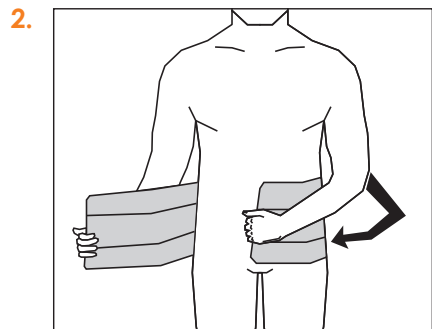


# APPLICATION

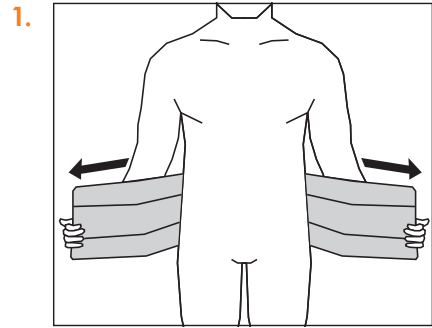

# AbdoCare

**SE** Elastisk gördel som är enkel att justera då kardborren kan fästas över hela gördelns yta. Finns i tre olika höjder och i storlekar med stort intervall. En storlek kan användas som universalstorlek.

**DK** Elastisk bælte, der er nem at justere, da velcrobåndet kan fastgøres på hele bæltets overflade. Fås i tre forskellige højder og størrelser med store intervaller. En størrelse kan anvendes som en universel størrelse.

**NO** Elastisk støttebelte som er enkel å justere da borrelåsen kan festes på hele overflaten av støttebeltet. Finnes i tre ulike høyder og i størrelser med stort intervall. En størrelse kan brukes som universalstørrelse.

**FI** Joustava vyö, jota on helppo säätää, sillä tarranauha voidaan kiinnittää koko vyön pintaan. Saatavana kolmella eri korkeudella ja laajalla kokovaiikoimalla. Yhtä kokoa voidaan käyttää yleiskokoisena.

**EN** Elastic binder that is easy to adjust as the velcro can be secured across the entire surface. Available in three different heights and in sizes with large intervals. One size can be used as a universal size.

**DE** Elastischer Gürtel, der sich leicht anpassen lässt, da der Klettverschluss über die gesamte Oberfläche des Gürtels angebracht werden kann. Erhältlich in drei verschiedenen Höhen und in einer großen Auswahl an Größen. Eine Größe kann als Universalgröße verwendet werden.

**NL** Elastische tailleband die gemakkelijk kan worden versteld omdat het hele oppervlak is bedekt met klittenband. Verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes en maten met een groot interval. Eén maat kan worden gebruikt als universele maat.

**ES** Faja elástica fácil de ajustar, ya que el velcro puede fijarse en cualquier parte de la superficie de la faja. Está disponible en tres largos diferentes y en tallas con un amplio intervalo. Cada talla puede utilizarse como talla universal.

**PT** Cinta elástica, que é fácil de ajustar, dado que o velcro pode ser fixo em toda a superfície da cinta. Disponível em três alturas e tamanhos diferentes, com uma gama ampla. Um tamanho pode ser usado como universal.

**IT** Cintura elastica facile da regolare poiché la chiusura a strappo può essere fissata su tutta la superficie della cintura. Disponibile in tre diverse altezze e in un'ampia gamma di dimensioni. Una taglia può fungere da taglia universale.

**FR** Gaine élastique et facile à ajuster grâce à une bande velcro pouvant adhérer à toute la surface. Proposée en trois hauteurs et en tailles à grands intervalles. Une taille peut être utilisée comme taille universelle.

For more information please consult our product catalogue or visit [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se).

For further questions, contact your doctor, health practitioner or medical equivalent - or NordiCare: +46 42-35 22 20, [info@nordicare.se](mailto:info@nordicare.se).

This packaging can be recycled as paper and the bag as plastic.



**DISPOSAL OF THE PRODUCT**  
Do not dispose the product in the nature. Dispose of the product in accordance with the waste laws of your municipality and/or country. The product does not present a risk of contamination.

**MD** Class I **CE**

**OEKO TEX®**  
**STANDARD 100**  
1976-298 DTI






**NordiCare®**

Solrosvägen 1, SE-263 62 Viken  
Phone +46 42 35 22 20, Fax +46 42 35 22 21  
[info@nordicare.se](mailto:info@nordicare.se), [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)

2025-11-07


# AbdoCare

## POST OP BINDER

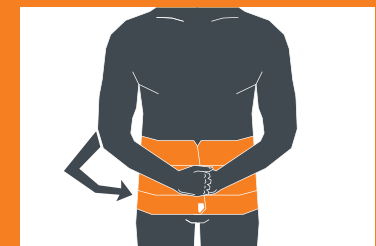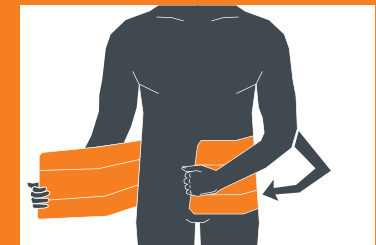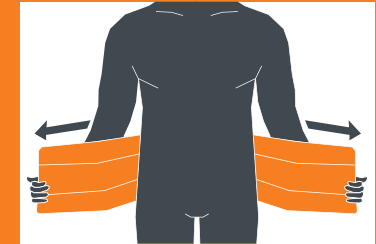


**NordiCare®**

# FITTING

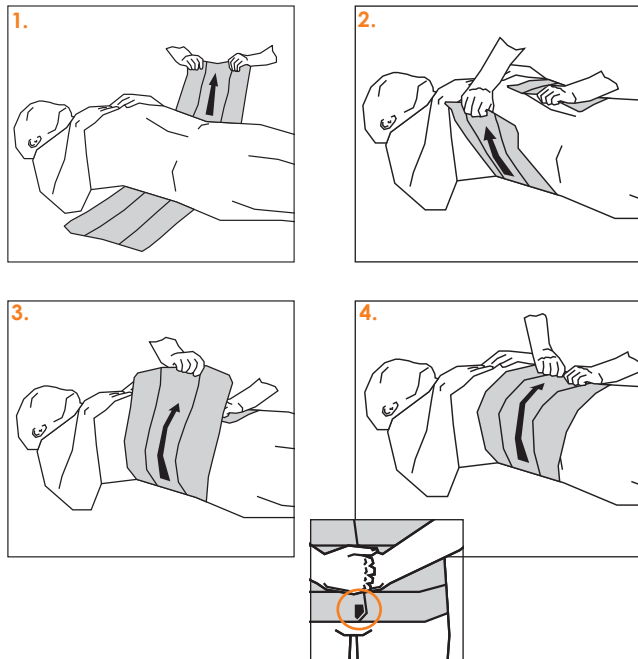


## SIZE

Art.nr	Height	Size 1 Circum in cm	Size 2 Circum in cm	Size 3 Circum in cm	Size 4 Circum in cm	Size 5 Circum in cm
50225	23 cm	75 – 100	95-120	115-140	140-190	-
50226	30 cm	75 – 100	95-120	115-140	140-190	190-240
50237	37 cm	-	-	-	-	190-240

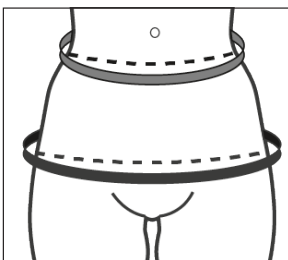

# HOLE FOR DRAIN/STOMA

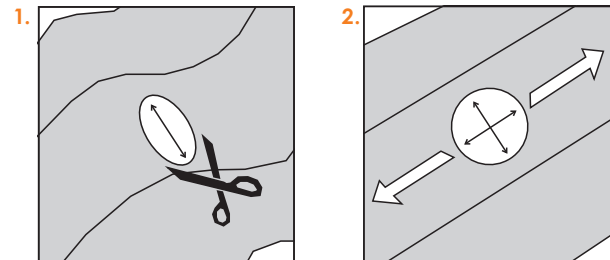

**SE** Placera gördeln så att det endast finns ett lager tyg där hålet skall klippas. Klipp ett ovalt hål, när bältet dras ut så blir hålet runt.

**DK** Placer bæltet således, at der kun er et lag stof, hvor hullet skal skæres. Klip et ovalt hul. Når bæltet strækkes ud, bliver hullet rundt.

**NO** Plasser støttebeltet slik at det bare er ett lag med stoff der hullet skal klippes. Klipp et ovalt hull slik at det blir rundt når beltet trekkes ut.

**FI** Aseta tukiliivi niin, että aukon suunnitellussa leikkaukohdassa on vain yksi kangaskerro. Leikkaa soikea reikä. Kun tukiliiviä venytetään, reikä pyöristyy.

**EN** Position the binder so there is only one layer of fabric where the hole will be cut. Cut an oval hole, when the belt is stretched out the hole will become round.

**DE** Legen Sie den Gürtel so an, dass an der Stelle, an der die Öffnung sein soll, nur eine Lage Stoff vorhanden ist. Schneiden Sie eine ovale Öffnung aus. Wenn der Gürtel gedehnt ist, wird die Öffnung rund.

**NL** Plaats de tailleband zodanig dat er maar één laag stof zit op de plek waar het gat moet komen. Knip een ovaal gat. Als de riem erdoorheen wordt getrokken, wordt het gat rond.

**ES** Colóquese la faja de manera que solo haya una capa de tejido en la zona donde va a realizar el orificio. Realice un corte ovalado, ya que al estirar el cinturón, el orificio quedará redondo.

**PT** Colocar a cinta elástica de forma que haja uma camada de tecido onde deve ser cortado o furo. Cortar um furo oval; o furo fica redondo quando o cinto é puxado.

**IT** Posizionare la cintura in modo che vi sia un solo strato di tessuto nel punto in cui deve essere praticato il foro. Praticare un foro ovale, poiché togliendosi la cintura il foro sarà rotondo.

**FR** Placez la gaine de manière à ne laisser qu'une seule épaisseur de tissu là où doit être découpée l'ouverture. Découpez une ouverture ovale. Celle-ci deviendra ronde une fois la gaine étirée.

# CARE AND ADVICE

## Indications

**SE** Postoperativ gördel efter buk/bål-kirurgi. Stabiliserar vid bråck/stomi. Preventivt mot bråck.

**Kontraindikation:** Inklämda bråck. Infektion.

**DK** Postoperativ bælte efter abdominal operation og operation af overkrop. Stabiliserer ved brok/stomi. Forebyggende mod brok.

**Kontraindikationer:** Indeklemte brok. Infektion.

**NO** Postoperativt belte etter abdominal-/overkropsoperasjon. Stabiliserer ved brokk/stomi. Forebyggende mot brokk.

**Kontraindikasjoner:** Innklemte brokk. Infeksjon.

**FI** Leikkauksen jälkeinen tukiliivi vatsan/vartalon leikkauksen jälkeen. Stabiloituu tyrän/avanteen tapauksissa. Tyrämuodostuksen riskin pienentämiseksi. **Vasta-aiheet:** Puristuneet tyrät. Infektio.

**EN** Postoperative girdle after abdominal/trunksurgery. Stabilizes in case of hernia/stoma. Preventive against hernia.

**Contraindications:** Incarcerated hernia. Infection.

**DE** Postoperativer Hüftgürtel nach einer Bauch-/Rumpfoperation. Stabilisiert bei Hernien/Stoma. Vorbeugend gegen Hernie.

**Kontraindikationen:** Einklemmte Hernien. Infektion.

**NL** Postoperatieve tailleband na buik-/bekkenchirurgie. Stabiliseert bij een hernia/stoma. Voorkomt een hernia.

**Contra-indicatie:** Beklemde breuk, infectie.

**ES** Faja postoperatoria para utilizar tras cirugía abdominal o torácica. Proporciona estabilidad en caso de ostomía o hernia. Previene hernias.

**Contraindicaciones:** Hernia estrangulada. Infección.

**PT** Cinta elástica para pós-operatório de cirurgia no abdómen/tronco. Estabiliza no caso de hérnias ou estoma. Prevenção contra hérnias. **Contraindicações:** Hérnias encarceradas. Infeções.

**IT** Cintura postoperatoria dopo intervento chirurgico addominale/del tronco. Stabilizza in caso di ernia/stomia. Esercita un effetto preventivo contro l'ernia.

**Controindicazione:** Ernie incarcerate. Infezione.

**FR** Gaine post-opératoire après une chirurgie de l'abdomen ou du torse. Fonction de stabilisation lors d'hernie ou de stomie. Usage préventif contre les hernies.

**Contre-indication:** Hernies incarcérées. Infection.

## Washing Instructions



## Material

65% Polyester, 19% Nylon, 16% Elastane. Latex free.