




NordiCare®

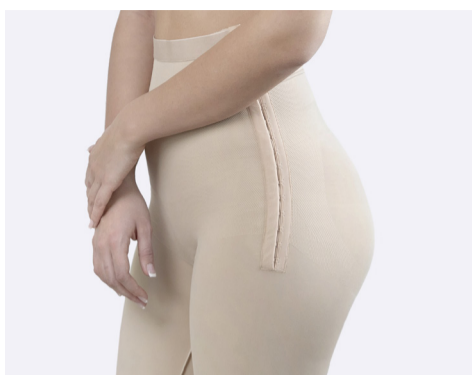


Compression Garments by NordiCare

Patsy

art no 51201

FULL LENGTH PANTS

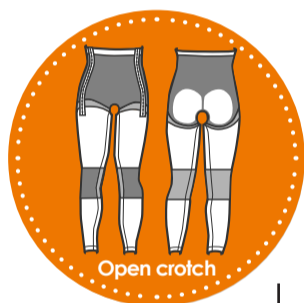

Compression class 1 (15-21 mmHg)




DISPOSAL OF THE PRODUCT
Do not dispose the product in the nature.
Dispose of the product in accordance with
the waste laws of your municipality and/or
country. The product does not present a
risk of contamination.




This packaging can be
recycled as paper and
the bag as plastic.

Available colors:
[Black swatch] [Grey swatch]

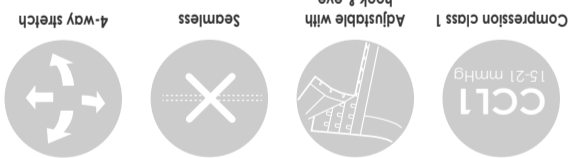

Size	Waist cm	Hip cm	Thigh cm
XS	62-68	86-91	46-50
S	69-75	92-97	50-54
M	76-83	98-103	54-58
L	84-92	104-111	58-62
XL	93-101	112-119	62-66
2XL	102-110	120-127	66-70

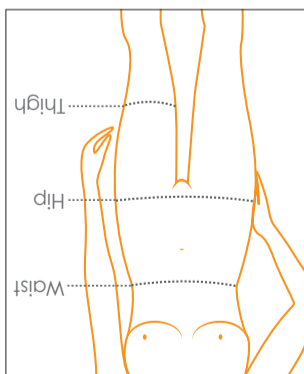

NordiCare®
Sofsvägen 1,
SE-263 62 Viken
Sweden
Phone +46 42 35 22 20,
Fax +46 42 35 22 21
info@nordicare.se,
www.nordicare.se

STANDARD
100
TEKO
6234-7001
DL1
www.oeko-tex.com

2025-05-13
P3231.01

PT Leggings de compressão até às canelas. Após uma cirurgia plástica nas pernas ou abdômen, fechos nos lados, virilha aberta e cantos em silicone no forro.

EN Full length compression pants. After surgery on the leg or abdomen. Closure on both sides, open crotch and silicone waistband.

SE Helling kompressionsbyxa. Efter plastikkirurgi på ben eller buk. Förslut i sidorna, öppen gren och silikonkant i linning.

DK Kompressionsbukser i fuld længde. Efter plastikkirurgi af ben eller mave. Lukkes i siderne, åbent skridt og silikonkant i linningen.

NO Legglang kompressionsbukse. Etter plastikkirurgi i ben eller buk. Knepping på begge sider, åpen midje og silikonkant i linningen.

FI Kokopikkäät tukinhousut. Jalokojen tai vaitsanduleen toimennpitäiden jälkeensä. Hakasklaimniitys kummassakin kyljessä.

ES Pantalón de compresión hasta los tobillos. Cierres laterales, entrepierna abierta y tras cirugía plástica en piernas o abdomen.

FR Pantalon de contention jusqu'aux chevilles. Après une chirurgie plastique des jambes ou de l'abdomen. Fermetures sur les côtés, entrejambe ouvert et bordure en silicone dans l'ourlet.

IT Pantaloni compressivi a lunghezza integrale. Indicati dopo un intervento di chirurgia plastica a gambe o addome. Chiusura sui lati, cavallo aperto e bordo in silicone in vita.

NL Kompressionshose mit voller Beinlänge. Nach plastischer Operation an Bauch oder Beinen. Verschluss an den Seiten. Offener Schnitt und Bund mit Silikonrand.

DE Kompressionshose mit voller Beinlänge. Nach plastischer Operation an Bauch oder Beinen. Verschluss an den Seiten. Offener Schnitt und Bund mit Silikonrand.

Patsy – FULL LENGTH PANTS

art no 51201

Application

SE 1. Se till att huden är torr. Öppna hyskor/hakar.

2. Dra försiktigt upp byxan över knäna, se till att "diamantstickningen" hamnar över/runtom knäet.

3. Dra upp byxan till höften. Kontrollera att grenpartiet sitter högt/ bekvämt i grenen samt att byxan är centrerad mitt bak. Dra sedan upp byxan över mage och rygg. För att underlätta påtagning vik silikonkanten utåt.

4. Knäpp hyskor/hakar i sidan till önskad storlek/form/kompression. Se till att flärpen bakom hyskor/hakar ligger slät mot huden.

DK 1. Huden skal være tør. Åben hæfter.

2. Træk forsigtigt bukserne op over knæene sørg for, at "diamantstrikket" slutter over/rundt om knæet.

3. Træk bukserne op til hoften. Sørg for at skridtdelen sidder højt/ behageligt i skridtet samt, at bukserne er centreret bagpå. Træk derefter bukserne op over maven og ryggen. For at lette påtagningen træk silikonkanten udad.

4. Luk hæfteri siden til den ønskede størrelse/form/kompression. Sørg for, at klappen bag hæfter/kroge ligger glat mod huden.

NO 1. Pass på at huden er tørr. Åpne hektene.

2. Dra buksen forsiktig over knærne slik at "diamantstrikket" havner over/rundt kneet.

3. Dra buksen opp til hoftene. Kontroller at midjepartiet er høyt/ behagelig, og at buksen er sentrert midt på bak. Dra buksen over mage og rygg. For å gjøre det enklere å ta på buksen skal du brette silikonkanten utover.

4. Frest hekter/kroker på siden til ønsket størrelse/form/kompresjon. Kontroller at flikene bak hekter/kroker ligger jevnt mot huden.

FI 1. Varmista, että iho on kuiva. Avaa lenkit/hakaset.

2. Vedä housut varovasti polvien yli siten, että timanttikuvio on polvien kohdalla ja ympärillä.

3. Vedä housut lantiolle asti. Haaraosan tulee asettua tarpeeksi korkealle ja mukavasti, ja housujen on asetuttava selkäpuolella keskelle. Vedä housut sitten vatsan ja selän yli. Pukeminen on helpompaa, kun käännät silikoninahan ulospäin.

4. Kiinnitä sivulla olevat hakaset siten, että koko/muoto/kompressoio on halutunlainen. Tarkista, että hakasten alla oleva kaistale jää liitteästi ihoa vasten.

EN 1. Make sure your skin is dry. Open the hook and eye closure.

2. Carefully pull the pants so that the "diamond knitting" is positioned over/around the knee.

3. Pull the pants up to the hip. Make sure that the crotch part is high/ comfortable in the crotch and that the pants are centered at the back. Then pull your pants over your stomach and back. To facilitate fold the silicone edge outwards.

4. Close the hook/eyes in the side at the desired size/shape/compression. Make sure the flap behind the hook/eyes is flat against the skin.

DE 1. Stellen Sie sicher, dass die Haut trocken ist Verschlussbaken öffnen.

2. Ziehen Sie die Hose vorsichtig über die Knie und achten Sie darauf, dass das "Diamantmuster" über dem/um das Knie herum liegt.

3. Ziehen Sie die Hose bis zur Hüfte hoch. Überprüfen Sie, ob der Schrittbereich hoch/bequem im Schritt liegt und die Hose mittig im Rücken sitzt. Dann die Hose über Bauch und Rücken hochziehen. Um das Anziehen zu erleichtern, klappen Sie den Silikonrand nach außen.

4. Die seitlichen Verschlussbaken in gewünschter Größe/Form/ Kompressionsgrad schließen. Stellen Sie sicher dass die Laschen hinter den Verschlussbaken glatt auf der Haut aufliegen.

NL 1. Zorg dat je huid droog is. Open de haakjes.

2. Trek de broek voorzichtig over de knieën. Let op dat het "diamantstiksel" over/ronnd de knie zit.

3. Trek de broek omhoog tot aan je heupen. Controleer of het kruis hoog/goed zit en of de broek aan de achterkant netjes in het midden zit. Trek de broek dan omhoog over je buik en rug. Om de body gemakkelijker aan te kunnen trekken, kun je de siliconen rand naar buiten draaien.

4. Zet de haakjes aan de zijkant vast op de gewenste grootte/vorm/ mate van compressie. Zorg dat de flap achter de haakjes glad tegen de huid ligt.

ES 1. Asegúrese de que la piel está seca. Abre los broches/corchetes.

2. Con precaución, súbbase la faja hasta que quede por encima de las rodillas, prestando atención para que el "tejido en diamante" quede sobre/alrededor de la rodilla.

3. Súbbase la faja hasta las caderas. Compruebe que la zona de la entrepierna resulta cómoda y que la faja queda en posición central en la parte de la espalda. Después, súbbase la faja por encima del abdomen y la espalda. Para que le sea más fácil ponerse la faja, doble el borde de silicona hacia fuera.

4. Abroche los corchetes laterales de tal forma que se ajusten a sus necesidades en cuanto a tamaño/forma/compresión. Preste atención para que la solapa situada detrás de los corchetes quede lisa.

PT 1. Assegurar que a pele está seca. Abrir os colchetes/ganchos.

2. Puxar o leggings com cuidado até às ancas. Controlar se a parte da virilha está colocada alta/confortável na virilha, assim como se o body está centrado nas costas.

3. Puxar as leggings até à anca. Controlar se a parte das virilhas está alta/confortável e se as leggings estão centradas no meio das costas. Puxar depois as leggings por cima do estômago e costas. Dobrar os cantos de silicone para fora para ser mais fácil vestir.

4. Apertar os colchetes/ganchos nos lados até obter o tamanho/ forma/compressão pretendida. Verificar se as bandas de proteção por trás dos colchetes/ganchos estão alisadas na pele.

IT 1. Assicurarci che la pelle sia asciutta. Aprire i ganci/occhielli.

2. Indossare con cautela i pantaloni fin sopra le ginocchia, assicurandosi che il "punto a diamante" si trovi sopra/intorno al ginocchio.

3. Tirare su i pantaloni fino ai fianchi. Assicurarci che la parte inguinale sia alta/comoda nel cavallo e che i pantaloni siano centrati sulla schiena. Quindi tirare su i pantaloni fin sopra l'addome e la schiena. Per indossare i pantaloni più facilmente ripiegare il bordo in silicone verso l'esterno.

4. Chiudere i ganci/occhielli sui lati in base alla dimensione/forma/ compressione desiderata. Assicurarci che il risvolto dietro i ganci/occhielli aderisca perfettamente alla pelle.

FR 1. Veillez à ce que la peau soit sèche. Défaites les oeillets/agrafes.

2. Remontez doucement le pantalon sur les genoux, en vous assurant que la partie en jacquard recouvre les genoux.

3. Remontez le pantalon jusqu'aux hanches. Vérifiez que la partie de l'entrejambe est bien remontée et confortable autour de l'entrejambe, et que le pantalon est bien centré sur l'arrière. Remontez ensuite le pantalon sur le ventre et le dos. Repliez la bordure en silicone vers l'extérieur pour faciliter l'habillement.

4. Fermez les oeillets/agrafes sur les côtés jusqu'à obtenir la taille/ forme/compression désirée. Assurez-vous que la lanière derrière les oeillets/crochets repose bien à plat contre la peau.

Indication

SE Kompressionsplagg efter plastikkirurgi. Motsvarande kompressionsklass 1. **Kontraindikationer:** Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar. Hög risk för trombos. Avvikande mått enligt tabell.

DK Kompressionstøj efter plastikkirurgi. Tilsvarende kompressionsklasse 1. **Kontraindikationer:** Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose. Afvigende mål iht. tabel.

NO Kompresjonsplagg etter plastisk kirurgi. Tilsvarende kompresjonsklasse 1. **Kontraindikasjoner:** Infeksjon. Arterielle sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose. Avvikend mål i henhold til tabell.

FI Kompressiovaatteet plastiikkirurgian jälkeen. Vastaava kompressioluokka 1. **Vasta-aiheet:** Infektio. Valtimoverenkiertohäiriöt. Suuri tromboosiriski. Poikkeavat mitat taulukon mukaan.

EN Compression garment after plastic surgery. Corresponding class 1. **Contraindications:** Infection. Arterial circulatory disorders. High risk of thrombosis. Deviating measurements according to table.

DE Kompressionskleidung nach plastischer Chirurgie. Entspricht Kompressionsklasse 1. **Kontraindikationen:** Infektion. Arterielle Durchblutungsstörungen. Hohes Thromboserisiko. Von der Größentabelle abweichende Maße.

NL Compressiekleiding na plastische chirurgie. Komt overeen met compressieklasse 1. **Contra-indicaties:** Infectie. Arteriële doorbloedingsstoornissen. Hoog risico op trombose. Afwijkende maten volgens tabel.

ES Prendas de compresión después de la cirugía plástica. Clase de contención correspondiente al nivel 1. **Contraindicaciones:** Infecciones, trastornos circulatorios en las arterias, riesgo de trombosis elevado. Diferentes medidas según tabla.

PT Vestuário de compressão para usar depois de uma cirurgia plástica. Corresponde à classe de compressão 1. **Contraindicações:** Infecções. Distúrbios na circulação arterial. Risco alto de trombose. Medidas divergentes de acordo com a tabela.

IT Indumento compressivo da utilizzare dopo la chirurgia plastica. Classe di compressione corrispondente a 1. **Controindicazioni:** Infezioni. Disturbi della circolazione arteriosa. Alto rischio di trombosi. Misure di scostamento come da tabella.

FR Vêtement de compression post-chirurgie esthétique. Correspondant à une compression de classe 1. **Contre-indications:** Infection. Troubles de circulation artérielle. Risque élevé de thrombose. Mensurations divergentes selon le tableau.

EN Compression garment after plastic surgery. Corresponding class 1. **Contraindications:** Infection. Arterial circulatory disorders. High risk of thrombosis. Deviating measurements according to table.

DE Kompressionskleidung nach plastischer Chirurgie. Entspricht Kompressionsklasse 1. **Kontraindikationen:** Infektion. Arterielle Durchblutungsstörungen. Hohes Thromboserisiko. Von der Größentabelle abweichende Maße.

NL Compressiekleiding na plastische chirurgie. Komt overeen met compressieklasse 1. **Contra-indicaties:** Infectie. Arteriële doorbloedingsstoornissen. Hoog risico op trombose. Afwijkende maten volgens tabel.

ES Prendas de compresión después de la cirugía plástica. Clase de contención correspondiente al nivel 1. **Contraindicaciones:** Infecciones, trastornos circulatorios en las arterias, riesgo de trombosis elevado. Diferentes medidas según tabla.

PT Vestuário de compressão para usar depois de uma cirurgia plástica. Corresponde à classe de compressão 1. **Contraindicações:** Infecções. Distúrbios na circulação arterial. Risco alto de trombose. Medidas divergentes de acordo com a tabela.

IT Indumento compressivo da utilizzare dopo la chirurgia plastica. Classe di compressione corrispondente a 1. **Controindicazioni:** Infezioni. Disturbi della circolazione arteriosa. Alto rischio di trombosi. Misure di scostamento come da tabella.

FR Vêtement de compression post-chirurgie esthétique. Correspondant à une compression de classe 1. **Contre-indications:** Infection. Troubles de circulation artérielle. Risque élevé de thrombose. Mensurations divergentes selon le tableau.

Information

SE Om det svider, skaver eller färgförändringar uppstår i huden, ta av produkten och kontakta utprovaren. Utprovning samt rekommendation om användning bör göras av eller under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Tänk på att mått kan variera under läkningsprocessen, en tid efter operation då eventuell svullnad gått ner kan en mindre storlek behövas. Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Hvis du oplever det svier eller gnaver, eller der opstår farveændringer på huden, tag da produktet af og kontakt hjælpemiddeleverandøren. Afprøvning og anbefaling til anvendelse skal foretages af en læge eller under vejledning af en sundhedsfagligt uddannet person. Vær opmærksom på at målene kan variere under helingsprocessen i tiden efter operationen. Når hævelsen falder, kan en mindre størrelse være påkrævet. Følg brugervejledningen for at få det bedste resultat. Alvorlige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

NO Hvis det svir, gnager eller hvis det oppstår fargeforandringer i huden, ta av produktet og kontakt utprøveren. Utprøving og anbefaling om bruk bør utføres av eller under ledelse av medisinsk personell. Følg brukerveiledningen for å få best resultat. Det kan være nødvendig med en mindre størrelse når hevelsen har gått ned etter operasjon. Alvorlige hendelser skal rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

FI Jos ihossa on palamista, hankausta tai värimuutoksia, poista tuote ja ota yhteyttä testaajaan. Lääketieteellisesti koulutetun henkilön tulee tehdä testejä ja suosituksia käyttötarkoituksesta tai hänen ohjauksessaan. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi noudata käyttäjän ohjeita. Muista, että mitat voivat vaihdella paranemisprosessin aikana, jonkin aikaa leikkauksen jälkeen, kun turvotus on vähentynyt. Tarkista, että hakasten alla oleva kaistale jää liitteästi ihoa vasten.

EN If you experience a stinging sensation, chafing or color changes in your skin, remove the product and contact your medical professional. Fitting, and recommended use should be handled by or under the supervision of a medical professional. For best results, follow the user instructions. Keep in mind that measurements may vary during the healing process, a time after surgery when any swelling has gone down, a smaller size may be required. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

DE Bei Brennen, Scheuern oder Hautverfärbungen, entfernen Sie das Produkt und wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal. Anprobe und Anwendungsempfehlungen sollten von oder unter Anleitung einer medizinisch geschulten Fachkraft durchgeführt werden. Für ein bestmögliches Resultat befolgen Sie bitte stets die Gebrauchsanweisung. Bedenken Sie, dass die Maße während des Heilungsprozesses variieren können. Einige Zeit nach der Operation, wenn die Schwellung zurückgegangen ist, kann eine kleinere Größe erforderlich sein. Ernsthafte Komplikationen müssen NordiCare und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

NL Als de huid begint te prikken, jeuken of van kleur verandert, trek het product dan uit en neem contact op met de aanmeter. Het aanmeten of aanbevelen voor gebruik moet worden uitgevoerd door of onder begeleiding van iemand met een medische achtergrond. Volg de gebruiksinstructies voor het beste resultaat. Hou er rekening mee dat de maten tijdens het genezingsproces kunnen variëren. Enige tijd na de operatie, wanneer de zwelling is verminderd, past een kleinere maat wellicht beter. Ernstige voorvallen moeten worden gemeld aan NordiCare en de bevoegde autoriteit.

ES Si le escuece o roza, o si se producen cambios de color en la piel, quítese el producto y contacte con quien se los vendió. Las pruebas así como recomendaciones de uso se deben hacer por o bajo la supervisión de una persona con formación médica. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de uso. Tenga en cuenta que, tras la intervención, las medidas pueden variar a lo largo del proceso de cicatrización, a medida que la hinchazón desaparezca, por lo que, en este caso, será necesaria una talla menor. Incidentes graves se informarán a NordiCare y a la autoridad competente.

PT Se arder, roçar ou observar alterações na cor da pele, deve despir o produto e contactar o técnico de prova. A prova e recomendações de uso devem ser feitas por ou sob a supervisão de um profissional de saúde. Seguir as instruções de utilização para obter os melhores resultados. Deve considerar que as medidas podem variar durante o processo de cicatrização; pode ser necessário um tamanho mais pequeno depois do inchaço pós-operatório desaparecer. Incidentes graves devem ser reportados à NordiCare, assim como às autoridades responsáveis.

IT In caso di bruciore, sfregamento o scolorimento della pelle rimuovere il prodotto e contattare il responsabile della prova. Le prove e le raccomandazioni per l'uso devono essere eseguite e fornite da o sotto la guida di una persona con formazione medica. Per ottenere i migliori risultati seguire le istruzioni per l'utente. Le misure possono variare durante il processo di guarigione dopo l'intervento chirurgico una volta che il gonfiore si è ridotto, pertanto potrebbe essere necessaria una taglia più piccola. Gli incidenti gravi devono essere segnalati a NordiCare e all'autorità competente.

FR En cas de sensations de piqûre ou de frottement, ou si la peau change de couleur enlevez le produit et contactez l'essayeur*se Les essayages et les recommandations d'utilisation doivent être réalisés par, ou sous la direction d'une personne ayant reçu une formation médicale. Suivre les instructions d'utilisation pour un résultat optimal. Souvenez-vous qu'une mensuration peut varier au cours du processus de guérison après l'opération: une fois l'éventuel gonflement résorbé, il vous faudra peut-être une taille plus petite. Tous les incidents graves doivent être signalés à NordiCare ainsi qu'à l'autorité compétente.

Material

87% Polyamide, 13% Elastane. Latex Free.

Washing Instructions



For more information please consult our product catalogue or visit www.nordicare.se. For further questions, contact your doctor, health practitioner or medical equivalent - or NordiCare: +46 42-35 22 20, info@nordicare.se.