




Compression Garments by NordiCare

Jolene

art no 51213

BODY

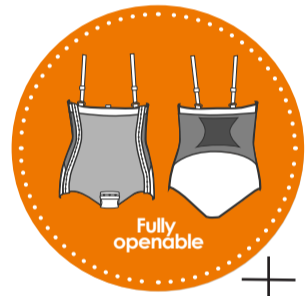

Compression class 1 (15-21 mmHg)

DISPOSAL OF THE PRODUCT
Do not dispose the product in the nature. Dispose of the product in accordance with the laws of your municipality and/or country. The product does not present a risk of contamination.

This packaging can be recycled as paper and the bag as plastic.

- Available colors:
- Compression class 1 (15-21 mmHg)
- Seamless
- 4-way stretch
- Fully adjustable & adjustable with hook & eye

Size	Waist cm	Hip cm
XS	62-68	86-91
S	69-75	92-97
M	76-83	98-103
L	84-92	104-111
XL	93-101	112-119
2XL	102-110	120-127



NordiCare
Sölvägen 1, SE-263 62 Viken, Sweden
Phone +46 42 35 22 20, info@nordicare.se, www.nordicare.se

MD Class I

STANDARD 100
OEKO TEX
6234-7001 D11
www.oeko-tex.com

2026-04-17 P3458

SE Kompressionsbody med hög midja. Efter plastikkirurgi på buk. Försluts i sidorna samt i grenen. Justerbara axelband. Sädettövät olkaimet.

DK Kompressionsbody med høj talje. Efter indgreb på mave. Lukkes i siderne og i skridtel. Justerbare skulderstropper. Sæddettövät olkaimet.

NO Kompressions-body med høy midje. Etter plastisk kirurgi i mage. Lukkes i siderne og i skrittet. Justerbare skulderbånd. Käytetään vatsan alueen plastiikkakirurgian jälkeen. Suljetaan sivulla ja haarasta.

FI Kompressiobody, korkea vyötärö. Käytetään vatsan alueen plastiikkakirurgian jälkeen. Suljetaan sivulla ja haarasta.

ES Body de compresión de cintura alta. Tras cirugía plástica en abdomen. Con cierre en los costados y la entrepierna. Säddettövät olkaimet.

EN Compression body with high waist. After surgery on the abdomen. Closes at the sides and at the crotch. Adjustable shoulder straps.

DE Kompressions-Bodysuit mit hoher Taille. Empfohlen nach Operationen an Bauch. Wird an den Seiten und im Schritt geschlossen. Verstellbare Schultergurte. Käytetään vatsan alueen plastiikkakirurgian jälkeen. Suljetaan sivulla ja haarasta.

NL Compressiebody met hoge taille. Na plastische chirurgie aan de buik. Sluit aan de zijkenen en in het kruis. Verstellbare schouderbandjes.

FR Body de contention avec dos haut Après une chirurgie plastique de l'abdomen. Fermeures sur les côtés et l'entrejambe. Breilles réglables.

IT Body compressivo a vita alta. Indicato dopo un intervento di chirurgia plastica su addome. Con chiusura sui lati e al cavallo. Spalline regolabili.

PT Body de compressão com cintura alta. Após uma cirurgia plástica do abdômen. Fechos nos lados e virilhas. Tira dos ombros ajustável.

Jolene – BODY

art no 51213

Application

SE 1. Se till att huden är torr. Öppna hyskor/hakar.

2. Dra försiktigt upp bodyn över mage och rygg. Kontrollera att bodyn är centrerad mitt bak.

3. Se till att dra upp ryggen ordentligt så att den kommer högt upp innan du hakar i och spänner axelbanden.

4. Knäpp hyskor/hakar i sidan till önskad storlek/form/kompression. Se till att flärpen bakom hyskor/hakar ligger slät mot huden.

DK 1. Huden skal være tør. Åben hægteer.

2. Træk forsigtigt bodyen op over maven og ryg. Sørg for, at bodyen er centreret midt bagpå.

3. Sørg for at trække ryggen ordentligt op, inden du lukker og strammer skulderstroppen.

4. Luk hægteer i siden til den ønskede størrelse/form/kompression. Sørg for, at klappen bag hægteer/kroge ligger glat mod huden.

NO 1. Pass på at huden er tørr. Åpne hektene.

2. Dra bodyen forsiktig over mage og rygg. Kontroller at bodyen er sentrert midt på bak.

3. Sørg for å trekke ryggen ordentlig opp slik at den kommer høyt opp før du hekter på og strammer skulderstroppene.

4. Fest hekter/kroker i siden til ønsket størrelse/form/kompresjon. Kontroller at flikene bak hekter/kroker ligger jevnt mot huden.

FI 1. Varmista, että iho on kuiva. Avaa hakaset.

2. Pue body varovasti päälle vatsan ja selän yli. Varmista, että body asetuu kellole selässä.

3. Varmista, että selkäosa nousee riittävästi ylös ennen kuin kiinnität hakaset ja kiristät olkaimet.

4. Kiinnitä sivujen hakaset niin, että koko, muoto ja kompressio ovat sopivat. Tarkista, että hakasten alla oleva kaistale asetuu tasaisesti ihoa vasten.

EN 1. Make sure the skin is dry. Open the hook and eye closure.

2. Carefully pull the body over the abdomen and back. Make sure the body is centered at the back.

3. Make sure to pull your back properly so that it gets high before you tighten the shoulder straps.

4. Close the hook/eyes in the side to achieve desired size/shape/compression. Make sure the flap behind the hook/eyes is flat against the skin.

DE 1. Stellen Sie sicher, daß die Haut trocken ist. Verschlusshaken öffnen.

2. Ziehen Sie den Body über Bauch und Rücken vorsichtig nach oben. Vergewissern Sie sich, daß der Body im Rücken zentriert sitzt.

3. Rückenteil fest nach oben ziehen, damit es möglichst hoch sitzt, bevor Sie die Schulterträger einhaken und festziehen.

4. Schließen Sie die seitlichen Verschlusshaken auf die gewünschte Größe/Form/Kompression. Achten Sie darauf, daß die Stoffbelege hinter den Verschlusshaken glatt auf der Haut aufliegen.

NL 1. Zorg dat je huid droog is. Open de haakjes.

2. Trek de body voorzichtig over je buik en rug. Controleer of de body aan de achterkant netjes in het midden zit.

3. Zorg ervoor dat je de achterkant goed omhoogtrekt, voordat je de schouderbandjes vasthaakt en aantrekt.

4. Zet de haakjes aan de zijkant vast op de gewenste grootte/vorm/mate van compressie. Zorg dat de flap achter de haakjes glad tegen de huid ligt.

ES 1. Asegúrese de que la piel está seca. Abre los broches/corchetes.

2. Con cuidado, súbase la faja hasta colocarla alrededor del abdomen y la espalda. Compruebe que la faja esté centrada en la parte de la espalda.

3. Asegúrese de subir bien la zona de la espalda de la prenda para que quede a la altura correcta antes de cerrar los corchetes y ajustar los tirantes.

4. Abroche los corchetes laterales de tal forma que se ajusten a sus necesidades en cuanto a tamaño, forma o compresión. Asegúrese de que no queden pliegues en la tela por detrás de los corchetes.

PT 1. Assegurar que a pele está seca. Abrir os colchetes/ganchos.

2. Puxar o body com cuidado por cima do estômago e costas. Controlar se o body está bem centrado nas costas.

3. Verificar se a parte das costas está bem puxadas para cima antes de fechar os colchetes e apertar as bandas dos ombros.

4. Apertar os colchetes/ganchos nos lados até obter o tamanho/forma/compressão pretendida. Verificar se as bandas de proteção por trás dos colchetes/ganchos estão alisadas na pele.

IT 1. Assicurarti che la pelle sia asciutta. Apri i ganci/occhielli.

2. Indossa il body delicatamente fino sopra l'addome e la schiena. Assicurarti che il body sia centrato sulla schiena.

3. Assicurati di sollevare correttamente la schiena in modo che il body sia alto prima di chiudere i ganci e stringere le spalline.

4. Chiudi i ganci/occhielli sui lati in base alla dimensione/forma/compressione desiderata. Assicurarti che il risvolto dietro i ganci/occhielli aderisce piatto alla pelle.

FR 1. Veillez à ce que la peau soit sèche. Défaites les œillets/agrafes.

2. Remontez doucement le body sur le ventre et le dos. Vérifiez que le body est bien centré sur l'arrière.

3. Assurez-vous de bien remonter la partie dorsale avant d'agrafer et d'ajuster les bretelles.

4. Fermez les œillets/agrafes sur les côtés jusqu'à obtenir la taille/forme/compression désirée. Assurez-vous que la lanière derrière les œillets/crochets repose bien à plat contre la peau.

Material

87% Polyamide, 13% Elastan. Latex free.

Indication

SE Kompressionsplagg efter plastikkirurgi. Motsvarande kompressionsklass 1.

Kontraindikationer: Sårinfektion. Arteriella cirkulationsstörningar. Hög risk för trombos. Avvikande mått enligt tabell.

DK Kompressionstøj efter plastikkirurgi. Tilsvarende kompressionsklasse 1.

Kontraindikationer: Sårinfektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose. Afvigende mål iht. tabel.

NO Kompresjonsplagg etter plastisk kirurgi. Tilsvarende kompressionsklasse 1.

Kontraindikasjoner: Sårinfeksjon. Arterielle sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose. Avvikende mål i henhold til tabell.

FI Kompresiovaate plastiikkakirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Vastaava kompressioluokka 1.

Vasta-aiheet: Haavainfektio. Valtimoverenkiertohäiriöt. Suuri tromboosiriski. Poikkeavat mitat taulukon mukaan.

EN Compression garment after plastic surgery. Corresponding class 1.

Contraindications: Wound infection. Arterial circulatory disorders. High risk of thrombosis. Deviating measurements according to table.

DE Kompressionskleidung nach plastischer Chirurgie. Entspricht Kompressionsklasse 1.

Kontraindikationen: Wundinfektion. Arterielle Durchblutungsstörungen. Hohes Thromboserisiko. Von der Größentabelle abweichende Maße.

NL Compressiekleiding na plastische chirurgie. Komt overeen met compressieklasse 1.

Contra-indicaties: Wondinfectie. Arteriële doorbloedingsstoornissen. Hoog risico op trombose. Afwijkende maten volgens tabel.

ES Prendas de compresión después de la cirugía plástica. Clase de contención correspondiente al nivel 1.

Contraindicaciones: Infección de la herida, trastornos circulatorios en las arterias, riesgo de trombosis elevado. Diferentes medidas según tabla.

PT Vestuário de compressão para usar depois de uma cirurgia plástica. Corresponde à classe de compressão 1.

Contraindições: Infecção da ferida. Distúrbios na circulação arterial. Risco alto de trombose. Medidas divergentes de acordo com a tabela.

IT Indumento compressivo da utilizzare dopo la chirurgia plastica. Classe di compressione corrispondente a 1.

Contraindicazioni: Infezione della ferita. Disturbi della circolazione arteriosa. Alto rischio di trombosi. Misure di scostamento come da tabella.

FR Vêtement de compression post-chirurgie esthétique. Correspondant à une compression de classe 1.

Contre-indications: Infection de la plaie. Troubles de circulation artérielle. Risque élevé de thrombose. Mensurations divergentes selon le tableau.

Information

SE Om det svider, skaver eller färgförändringar uppstår i huden, ta av produkten och kontakta utprovaren. Utprovning samt rekommendation om användning bör göras av eller under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Tänk på att mått kan variera under läkningsprocessen, en tid efter operation då eventuell svullnad gått ner kan en mindre storlek behövas. Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Hvis du oplever, at det svier, gnaver, eller at der opstår misfarvninger på huden ved brug af produktet, skal du straks tage produktet af og kontakte leverandøren. Afprøvning og anbefaling af produktets anvendelse skal altid foretages af en læge eller under vejledning af autoriseret sundhedspersonale. Vær opmærksom på, at målene kan variere i helingsprocessen efter en operation. Når hævelsen aftager, kan en mindre størrelse være nødvendig. Følg brugsanvisningen for at opnå det bedste resultat. Alvorlige hændelser i forbindelse med brug af produktet skal rapporteres til NordiCare og relevante myndigheder.

NO Hvis det svir, gnager eller hvis det oppstår fargeforandringer i huden, ta av produktet og kontakt utprøveren. Utprøving og anbefaling om bruk bør utføres av eller under ledelse av medisinsk personell. Følg brukerveiledningen for å få best resultat. Det kan være nødvendig med en mindre størrelse når hevelsen har gått ned etter operasjon. Alvorlige hendelser skal rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

FI Jos iholla esiintyy pottelua, hankausta tai värimuutoksia, poista tuote ja ota yhteyttä asiantuntijaan. Tuotteen sovitusta ja käyttöä koskevat suositukset tulee tehdä lääkärin toimesta tai terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi noudata käyttöohjeita. Huomioi, että mitat voivat muuttua paranemisprosessin aikana. Jonkin ajan kuluttua leikkauksesta, kun turvotus on laskenut, pienempi koko voi olla tarpeen. Vakavista haittatapahtumista tulee ilmoittaa NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EN Should you experience any stinging, irritation, or discoloration of the skin during use of the product, remove the product immediately and contact the supplier. The fitting and recommendation for use of the product must always be conducted by a physician or under the supervision of authorized healthcare professionals. Please note that measurements may vary throughout the healing process following surgery. As swelling subsides, it may become necessary to select a smaller size. Adhere to the instructions for use to ensure optimal results. All serious adverse events related to the use of the product must be reported to NordiCare and the appropriate regulatory authorities.

DE Bei Brennen, Scheuern oder Hautverfärbungen, entfernen Sie das Produkt und wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal. Anprobe und Anwendungsempfehlungen sollten von oder unter Anleitung einer medizinisch geschulten Fachkraft durchgeführt werden. Für ein bestmögliches Resultat befolgen Sie bitte stets die Gebrauchsanweisung. Bedenken Sie, dass die Maße während des Heilungsprozesses variieren können. Einige Zeit nach der Operation, wenn die Schwellung zurückgegangen ist, kann eine kleinere Größe erforderlich sein. Ernsthafte Komplikationen müssen NordiCare und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

NL Als de huid begint te prikken, jeuken of van kleur verandert, trek het product dan uit en neem contact op met de aanmeter. Het aanmeten of aanbevelen voor gebruik moet worden uitgevoerd door of onder begeleiding van iemand met een medische achtergrond. Volg de gebruiksinstructies voor het beste resultaat. Hou er rekening mee dat de maten tijdens het genezingsproces kunnen variëren. Enige tijd na de operatie, wanneer de zwelling is verminderd, past een kleinere maat wellicht beter. Ernstige voorvallen moeten worden gemeld aan NordiCare en de bevoegde autoriteit.

ES En caso de ardor, irritación o cambios en la coloración de la piel durante el uso del producto, retire el producto inmediatamente y contacte al proveedor. La prueba y el uso del producto deben hacerse siempre por indicación de un médico o bajo la supervisión de personal sanitario autorizado. Tenga en cuenta que las medidas pueden cambiar durante la recuperación después de una operación. A medida que la inflamación disminuya, puede ser necesario usar una talla más pequeña. Siga las instrucciones de uso para obtener el mejor resultado. Informe cualquier incidente grave relacionado con el producto a NordiCare y a las autoridades sanitarias competentes.

PT Se arder, roçar ou observar alterações na cor da pele, deve despir o produto e contactar o técnico de prova. A prova e recomendações de uso devem ser feitas por ou sob a supervisão de um profissional de saúde. Seguir as instruções de utilização para obter os melhores resultados. Deve considerar que as medidas podem variar durante o processo de cicatrização; pode ser necessário um tamanho mais pequeno depois do inchaço pós-operatório desaparecer. Incidentes graves devem ser reportados à NordiCare, assim como às autoridades responsáveis.

IT In caso di bruciore, sfregamento o scolorimento della pelle rimuovere il prodotto e contattare il responsabile della prova. Le prove e le raccomandazioni per l'uso devono essere eseguite e fornite da o sotto la guida di una persona con formazione medica. Per ottenere i migliori risultati seguire le istruzioni per l'utente. Le misure possono variare durante il processo di guarigione dopo l'intervento chirurgico una volta che il gonfiore si è ridotto, pertanto potrebbe essere necessaria una taglia più piccola. Gli incidenti gravi devono essere segnalati a NordiCare e all'autorità competente.

FR En cas de sensations de piqûre ou de frottement, ou si la peau change de couleur enlevez le produit et contactez l'essayeur. Les essayages et les recommandations d'utilisation doivent être réalisés par, ou sous la direction d'une personne ayant reçu une formation médicale. Suivre les instructions d'utilisation pour un résultat optimal. Souvenez-vous qu'une mensuration peut varier au cours du processus de guérison après l'opération: une fois l'éventuel gonflement résorbé, il vous faudra peut-être une taille plus petite. Tous les incidents graves doivent être signalés à NordiCare ainsi qu'à l'autorité compétente.

Washing Instructions



For more information please consult our product catalogue or visit www.nordicare.se. For further questions, contact your doctor, health practitioner or medical equivalent - or NordiCare: +46 42-35 22 20, info@nordicare.se.