


Indledende tilpasning – til sundhedsfagligt personale:



1. Åbn ortosen. Indstil den ønskede længde af skinnerne ved hjælp af ortosens teleskopmekanisme. Sikre dig, at skinnerne er lige lange på begge sider. Hvis det er nødvendigt, kan benmanchetterne flyttes.

Instruktionsvideo:

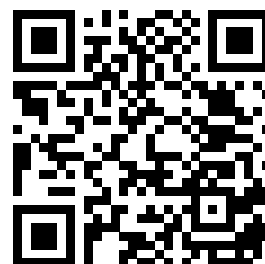


2. Bøj aluminiumsskinnerne efter benets kontur. Placer leddet på en stabil overflade, og bøj skinnerne forsigtigt, men fast.

BEMÆRK: Flyt aluminiumshylserne, før skinnerne bøjes. Flyt dem derefter tilbage til den ønskede placering.



3. Centrér ortosens led i knæleddets højde. Luk derefter spænderne på remmene i den rækkefølge, der er vist på billedet (A-D), og stram remmene. Hvis stropperne er for lange, kan de klippes til.

Lad patienten føle efter, så det ikke gnaver eller trykker nogen steder eller patienten føler ubehag.

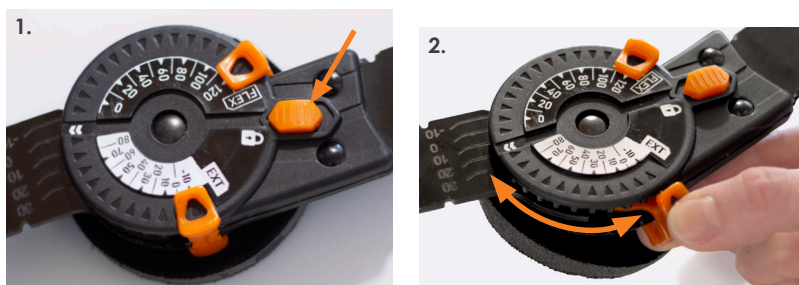

ROM-indstillinger:

SE 1. Ortosen kan låses med hurtiglåseknop fra -10° til 30° under indstillingen. Når låseknappen er låst op, kan patienten bevæge knæleddet inden for det givne bevægelsesområde. Gentag indstillingen på begge sider.

2. Indstil det ønskede bevægelsesområde i leddene: træk ud justeringsknappen og flyt til den ønskede position, slip knappen. Gentag indstillingen på begge sider.