


Første tilpasning – for helsepersonell:



1. Still inn ønsket lengde på skinnene ved hjelp av ortosens teleskopmekanisme. Pass på at skinnene blir like lange på begge sidene. Ved behov kan benmansjettene flyttes.

Instruksjonsvideo:

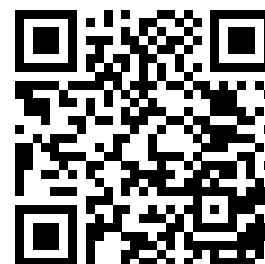


2. Bøy aluminiumsskinnene etter benets kontur. Plasser leddet på en stabil overflate og bøy skinnene forsiktig, men bestemt.

MERK: Flytt aluminiumsmansjettene før du bøyer skinnene. Flytt dem deretter tilbake til ønsket plassering.



3. Sentrer ortosens ledd i kneleddets høyde. Lukk deretter spennene på stroppene i rekkefølgen vist på bildet (A-D) og stram stroppene. Hvis båndene er for lange, kan de klippes av.

La pasientene kjenne etter slik at ortosen ikke gnager eller skaper trykk.

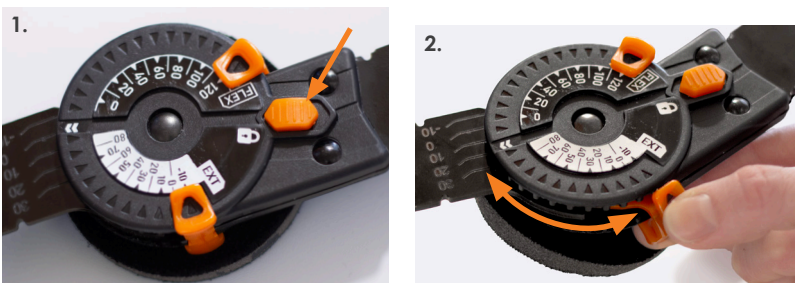

ROM-innstillinger:

SE 1. Oleddet på ortosen kan låses med hurtiglåseknappen fra -10° til 30° under innstillingen. Når låseknappen er låst opp kan pasienten bevege kneleddet innenfor det gitte bevegelsesintervallet. Gjenta innstillingen på begge sider.

2. Still inn ønsket bevegelsesintervall i leddene: trekk ut justeringsknappen og flytt til ønsket posisjon, slipp knappen. Gjenta innstillingen på begge sider.