

Shoulder ABDuction Pillow 15°

Påføringsvejledning

Art.nr. 20130

To stropssystemer




A. System med **enkel nakkestrop** (forudindstillet ved levering). For lettere påføring, f.eks. på en bedøvet patient.

B. Rem til system med **dobbelte remme** (medfølger separat). Til påføring 1–2 dage efter operation og giver mere komfortabel støtte.

Forberedelse til system med dobbelte remme.



1. Fjern den enkle nakkestrop (A) ved at løsne den på bagsiden. Tag velcronæbet (B) af, og træk remmen ud af begge klikspænder (C). Klikspænderne skal ikke åbnes.

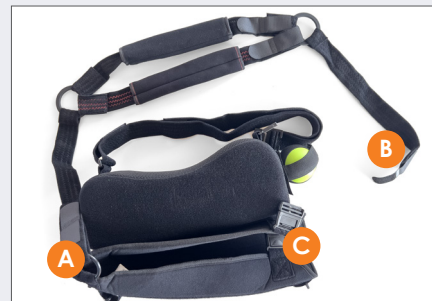

2. Tag systemet med dobbelte remme frem, og fastgør den længste rem i ringen bagpå (A). Tag velcronæbet af den anden (korte) ende (B), og før remmen gennem begge klikspænder (C), og sæt velcronæbet på igen.

Tilpasning



1. Løsn slyngen/posen fra velcro på puden og åbn alle tre klikspænder.
2. Placér puden korrekt med klikspændet foran under den skadede arm i taljehøjde.
3. Fastgør taljeremmen foran med spændet (A).
4. Placér underarmen i slyngen/posen med albuen så langt tilbage som muligt (B).
5. Fastgør slyngen/posen på puden.
6. Fastgør tommelfingerremmen mellem tommel- og pegefinger (C).
7. Fastgør underarmsremmen til slynge og pude (D).
8. Før nakkestroppen over nakken og den modsatte skulder. Fastgør klikspænderne (E).
9. Justér brystremmen (F), så hånden placeres lidt højere end albuen.
10. Justér længden på alle remme, og klip dem til efter behov.
11. Ved grebsøvelser åbnes underarmsremmen (D) og klikspænderne (E), så bolden (G) kan tages ud.

