

Shoulder ABDuction Pillow 15°

Appliceringsguide

Art.nr. 20130

Två olika upphängningssystem




A. System med **enkel nackrem** (förinställd i leveransen). För enklare applicering vid tex sövd patient.

B. Rem för system med **dubbla remmar**. (medföljer separat). För applicering 1-2 dagar efter kirurgi och ger bekvämare stöd.

Förberedelse för flerbandssystem med dubbla remmar



1. Ta bort den enkla nackremmen (A) genom att lossa den på baksidan. Ta av krokodilgapet (B) och dra ut remmen ur båda klickspännena (C). Klickspännena ska inte öppnas.

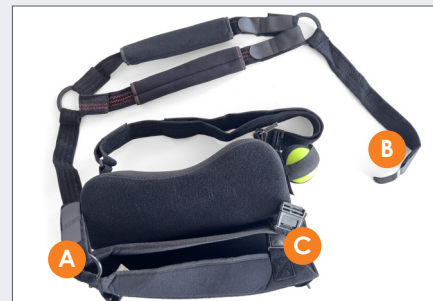

2. Ta fram flerbandssystemet och fäst den längsta remmen i ringen bak (A). Ta loss krokodilgapet på den andra (korta) änden (B) och trä bandet genom båda klickspännena (C) och sätt tillbaka krokodilgapet.

Utprovning



1. Lossa slingan/påsen från kudden och öppna alla tre klickspännena.
2. Placera kudden rättvänd (klickspännet fram) under den skadade armen i midjehöjd.
3. Fäst midjeremmen fram med spännet (A).
4. Placera underarmen i slingan/påsen med armbågen så långt bak som möjligt (B).
5. Fäst slingan/påsen på kudden.
6. Fäst tumremmen mellan tumme och pekfinger (C).
7. Fäst underarmsremmen på slinga och kudde (D).
8. Dra nackremmen över nacken och motsatt axel och fäst klickspännena (E).
9. Justera bröstremmen (F) så att handen placeras något högre än armbågen.
10. Justera längden på alla remmar och klipp av vid behov.
11. Vid klämövningar, öppna underarmsremmen (D) och klickspännena (E) för att ta ut bollen (G).

