



Stratus


Tukeva walker-ortoosi

- ✓ Erittäin kevyt
- ✓ Siro muotoilu
- ✓ Matala profiili
tasapainoiseen kävelyyn
- ✓ Kaksi integroitua pumppua
- ✓ Kaksi erikseen säädettävää ilmakammiota
- ✓ Tasainen kompressio

NordiCare[®] 

Sujuvaa kävelyä nilkan immobilisaation aikana

Stratus-kävelyortoosi yhdistää erinomaisen vakauden ja käyttömukavuuden ja tukee toipumista jalkaterän ja nilkan vammojen jälkeen. Erittäin kevyt ja matalaprofiilinen rakenne edistää luonnollista ja tasapainoista kävelyä sekä tarjoaa luotettavan immobilisaation ja suojan koko hoitojakson ajan.

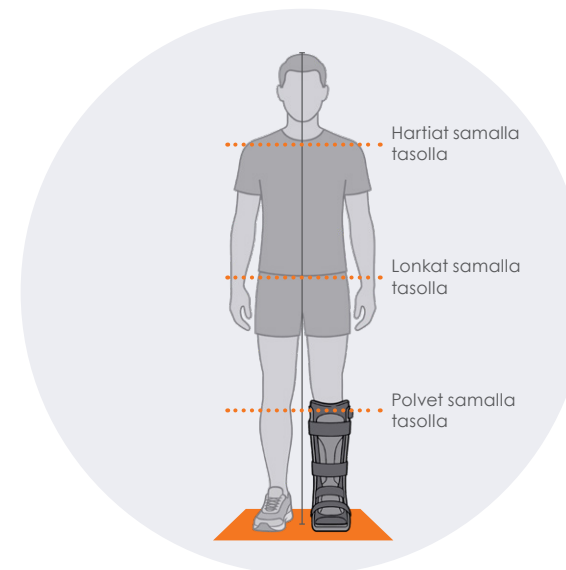

Matala profiili tukee tasapainoista kävelyä

Matala kantakorkeus vastaa tavallisten kenkien kantakorkeutta, mikä edistää tasapainoista ja luonnollista kävelyä ja vähentää tarvetta kompensoida korkeuseroa kehoa kallistamalla. Tämä voi vähentää jalkojen välisestä korkeuserosta aiheutuvaa selän, lonkkien ja polvien kuormitusta. Matala profiili vähentää myös tarvetta korottaa vastakkaisen jalan kenkää.

Yksilöllisesti säädettävä

Täysin integroitu kaksoispumppujärjestelmä mahdollistaa istuvuuden ja kompression helpon säätämisen ilman erillistä pumppua. Kaksi toisistaan riippumatonta ilmakammiota, yksi kummallakin puolella, mahdollistavat tuen yksilöllisen säätämisen potilaan tarpeiden mukaan ja lisäävät käyttömukavuutta ja vakautta. Neljä säädettävää tarranauhaa pitävät ortoosin tukevasti paikallaan. Nilkkaahna auttaa varmistamaan jalkaterän oikean asennon.



Tehokas kompressio

Tasaisesti jakautuva pneumaattinen kompressio ympäröi jalkaterää ja nilkkaa miellyttävästi ja tukee niiden stabilointia ja immobilisaatiota. Kompressio voi myös vähentää turvotusta sekä lisätä tukea ja käyttömukavuutta koko toipumisen ajan.

Mukavuutta ja toimivuutta arkeen

Pehmeä pehmuste ja anatomisesti muotoiltu kuori lisäävät käyttömukavuutta myös pitkäaikaisessa käytössä. Hengittävät materiaalit parantavat ilmankiertoa (1), ja pehmeä, irrotettava varvassuoja suojaa jalkaterää ja pitää sen lämpimänä (2). Pehmuste on helppo irrottaa ja asettaa takaisin paikalleen. Mukana toimitettavilla lisäpehmusteilla voidaan tarvittaessa optimoida istuvuutta ja käyttömukavuutta (3). Luistamaton ulkopohja parantaa pitoa ja lisää turvallisuutta päivittäisessä käytössä (4).



Lisävarusteet

Saatavana on valikoima lisävarusteita istuvuuden, käyttömukavuuden ja toiminnallisuuden parantamiseksi.

	Lisävaruste	Koko	Tuotenro.
1	Sukat, 2 kpl	Universaali	802153000
2	Sadesuojaja	S/M, L/XL	802200040 / 60
3	Hygieniasuojus, 10 kpl	Universaali	802190000
4	Lisäpehmuste	XS-XL	802254030-70
5	Walker Wedge Kit 10°	1, 2	802240040 / 60



Plantaarifleksion säätö Walker Wedge Kit 10° -kiiloilla

Stratus-kävelyortoosin asentoa voidaan säätää helposti akillesjänteen repeämän kuntoutuksen aikana. Tarkasti kulmitetut 10°:n kiilat mahdollistavat jalkaterän ja nilkan hallitun asennon ja auttavat saavuttamaan halutun plantaarifleksion kuntoutuksen aikana. Kiiloja voidaan pinota päällekkäin 10°, 20° tai 30°:n plantaarifleksion saavuttamiseksi. Kiilat kiinnitetään kaksipuolisella teipillä.



Käyttöaiheet ja tuotenumerot

- Akillesjänteen repeämä (kantakiilojen kanssa).
- Vakaa jalkaterän tai nilkan murtuma.
- Vaikeat nilkan nyrjähdykset ja pehmytkudosvammat.
- Leikkauksen jälkeinen kuntoutus ja immobilisaatio.

Stratus tuotenro.	Koko	Kengän koko
802250030	XS	<35
802250040	S	36-39
802250050	M	40-44
802250060	L	44-46
802250070	XL	>46