

Endodonti


Nya och innovativa produkter
för tandläkare.



GPR

MANI®

— GUTTA PERCHA REMOVER —

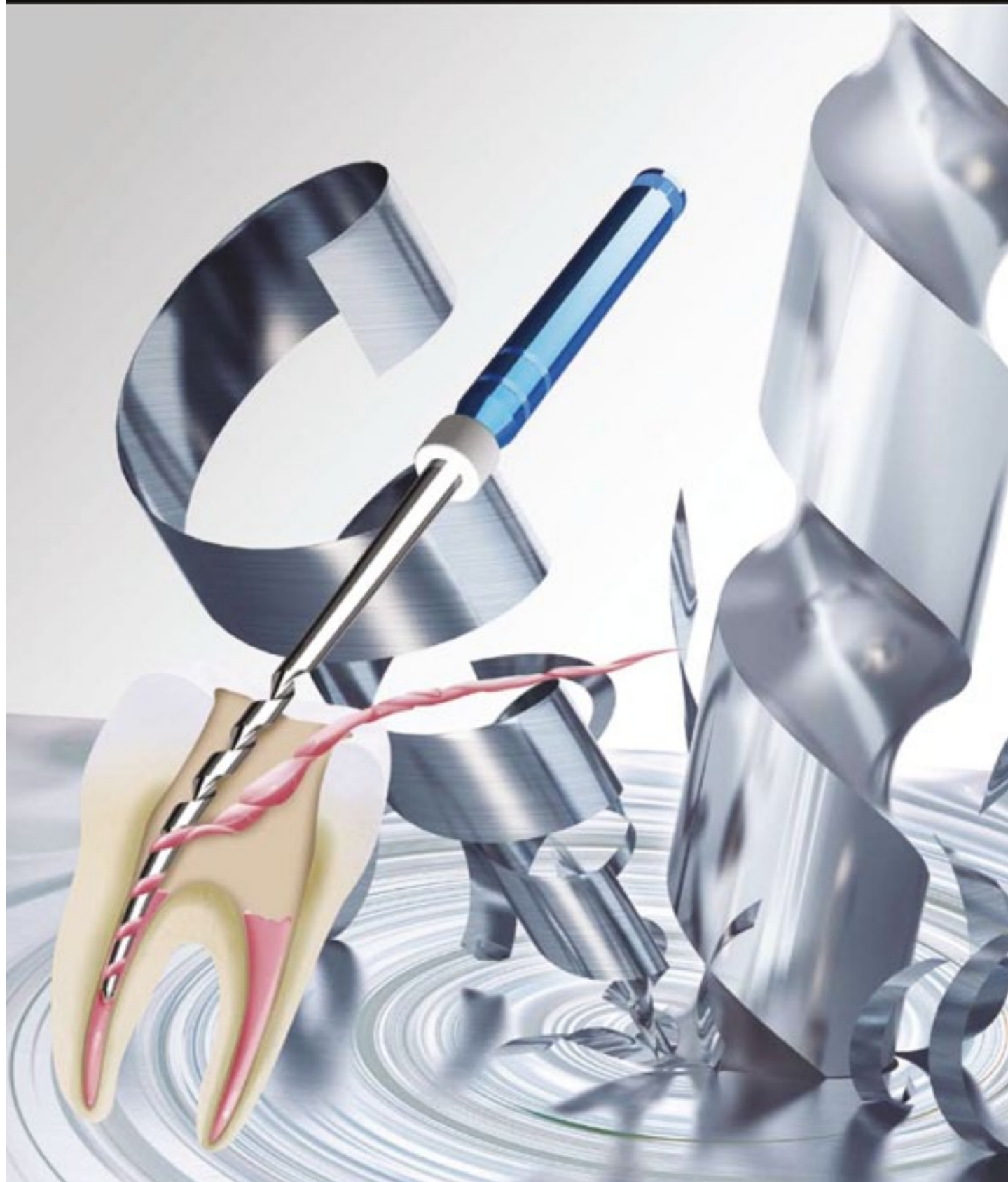

Superior Results!

Fast, Easy, & Efficient

Two Simple Steps!

STEP 1

From crown to middle

- Select 1S/#70 or 2S/#50. (Depend on the shape of root canal)
- Attach the File on the top of GP (Gutta Percha) and rotate softly
- 1st groove catching the GP and file goes into the deep naturally.
- Pause the file 1-2 seconds at around the middle of the canal. (before the curve)
- Move the file in pull-stroke motion and remove the debris. STEP1-Finish.

STEP 2

From the middle to the apical 1~2mm

- Select 3N/#40 or 4N/#30. (Depend on curve of root canal)
- Set a rubber stopper length of 1-2mm upto the apex.
- Pause the file 1-2 seconds at around the middle~1-2mm short from the apex.
- Move the file in pull-stroke motion and remove the debris. STEP2-Finish.



Hyperelasticity+Shape Memory Effect
Take Note Thermally treated 5mm tip Shape Memory Effect files increase flexibility and fatigue resistance (compared with conventional products)

Examples



Provided by Dr. Yasuhisa Tsujimoto Nihon University School of Dentistry at Matsudo Department of Dentistry

FEATURES

- Stress-free and easy to use, with torque control and reversal !
- Fast & dynamic removal !
- No need for solvents !

Max. Allowable Speed 1000±500min⁻¹

Model Name	Size	Taper	Working Length	Material	Pack	Art. nr	Pris	
1S	#70	0.04	16mm	Stainless	4pcs	401022	59:-	
2S	#50	0.04	18mm	Stainless	4pcs	401023	59:-	
3N	#40	0.04	21mm	NiTi	4pcs	401024	119:-	
4N	#30	0.04	21mm	NiTi	4pcs	401025	119:-	
Assorted Pack	MÄSSPRIS! 87:- exkl. moms	#70×1 #50×1 #40×1 #30×1	0.04	16mm×1 18mm×1 21mm×1 21mm×1	Stainless 2pcs. NiTi 2pcs.	4pcs	401026	87:-

⚠ Please read attached instructions carefully before use

Normedico är generalagent för Mani produkter i Sverige.

NORMEDICO

För mer info kontakta oss!

www.normedico.com
 email: info@normedico.com
 Tel. +46 8 751 77 77 • Fax: +46 8 751 87 77



NYHET!

Silk™ by MANI®

**Predictable Results + Silky-Smooth Feel
A Winning Combination**

Vi presenterar Silk files, anatomiskt baserat med en slät och taktill känsla (inget "skruva in" i kanalen) och som ändå ger ett effektivt och säkert resultat. Gjort av nickel & titan.

Introduktionspris: 199:-
3st/fp. Ord.pris 320:-

MANI®



NORMMEDICO AB

Smart Apex Lokalisator

Dr's Finder

Nu lanserar vi den senaste teknologin inom Apex Lokalisering.

Dr's Finder provide accurate with newest technology.
Dr's Finder is the best solution for endodontic treatment.



4,399 sek

Included accessories




Smart Apex Locator

www.normmedico.se
order@normmedico.com
Tel +46 (0) 8 751 7777



NORMEDICO PRESENTERAR
DIGIREX® PSP SCANNER
 DIGITAL DENTAL RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEM

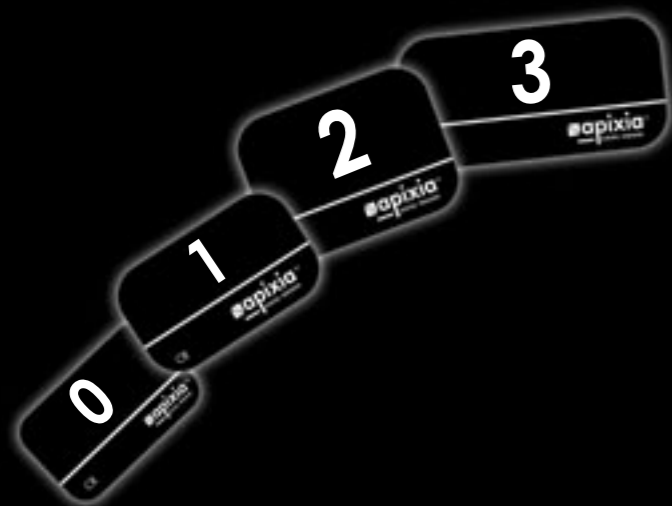

DIGIREX® PSP
 PHOTO-STIMULABLE PHOSPHOR PLATE



Produkt	Art. nr
Apixia Scanner	902780
Phosphor Plate size 0, sets: 4	902782
Phosphor Plate size 2, sets: 5	902783
Phosphor Plate size 3, sets: 2	902784
Endomax Hanppiece Endodontic, 5 sets	902785
E barrier envelope #0, 2 box	902786
Phosphor Plate Barrier, 2 box, Envelope (for size1&2)	902787
Plate barrier envelope #3, 2 box	902788



Flare Files NiTi

Dessa handfiler har startat en global revolution, deras unika .05 taper och patenterade termiska behandling ger oöverträffad flexibilitet, vasshet och effektivitet jämfört med konkurrenter.

Storlek (6st/fp)	Art.nr
25mm Size 15	400185
25mm Size 20	400186
25mm Size 25	400187
25mm Size 30	400188
25mm Size 35	400189
25mm Size 40	400190



Diamond Bur för Endo

End Cutting

FIG NO.	840
DIAMETER	012
INTERNATIONAL REF.	EX-18
HEAD LENGTH (MM)	END CUT
COARSE	
MEDIUM	
FINE	
EXTRA FINE	

Carbide Burs

Storlek (3st/fp)	Art.nr
#5	400520
#6	400521
#7	400522
#8	400523
#169L	400524
#701L	400525
#M15EZ	400526
#M15ZB	400527

MANI

Underlätta rotbehandlingen med TF Adaptive System

NiTi Endo File System



En Fin Dam

Normedico presenterar nya ElasticDam. En Kofferdamduk av riktigt hög kvalitet.



Latex Dental Dam
Material: Latex
Storlek: 15,2 x15,2 cm
Antal: 36 st/fp
Art. nr: 450540

**KÖP 3
FÅ 2 GRATIS!**



Endodonti

Instrument av högsta kvalitet från Normedico.

Håltång för Kofferdam

NORMEDICO

Rostfritt stål. Autoklaverbar. Modellnamn: AINSWORTH
Längd: 160mm

		Art nr
Håltång, Nr 5560-2	st	450121

Klammertång

NORMEDICO

Rostfritt stål. Autoklaverbar.
Modellnamn: WASHINGTON
Längd: 175mm

		Art nr
Klammertång, Nr 5580	st	450128

Klammertång

NORMEDICO

Rostfritt stål. Autoklaverbar.
Modellnamn: BREWER
Längd: 175mm

		Art nr
Klammertång, Nr 5570	st	450129

Normedico Kofferdamhållare

NORMEDICO

Plast. Har 10st fästpunkter och autklaverbar.
Storlek 15cm

		Art nr
Vit	st	411504




Kofferdamklammer Anterior

NORMEDICO

Rostfritt stål. Nickelfri och autoklaverbar.

		Art nr
00 Små premolar	st	12831
9 Generell framtänder	st	12835
210 Framtänder 11 , 21	st	12844
211 Universell framtänder generellt	st	12845
212 Framtänder 12 , 22	st	12846

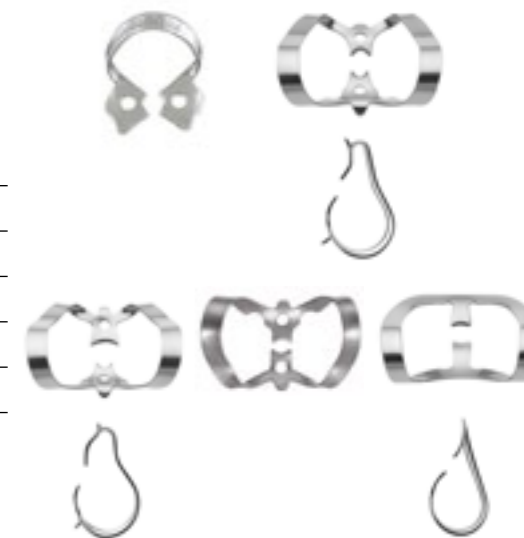

Kofferdamklammer Premolarer

NORMEDICO

		Art nr
2 Premolar	st	12832
2A UK Stor Premolar	st	12833
27 ÖK/UK utan vingar	st	12839
206 Premolar	st	12842
209 Premolar och små molarer	st	12843



Kofferdamklammer Molarer Rotrester

NORMEDICO


		Art nr
14 Molar med delvis rotrester	st	12836
14A Stora molarer med delvis rotrester	st	12837



Kofferdamklammer Molarer Generella

NORMEDICO

		Art nr
7 UK Molar	st	12834
201 ÖK Molar Stor	st	12840
205 ÖK Molar Stor	st	12841

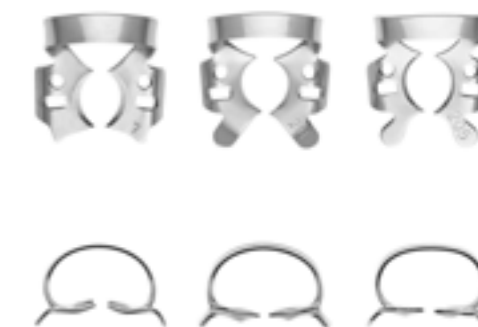

Kofferdamklammer Molarer Höger/Vänster

NORMEDICO

		Art nr
26 UK Små Molar	st	12838




Normedico AB distributes and markets dental needles from Korea in Sweden, Finland, Norway and Denmark. We are looking for distributors and partners.



Phone: +46 8 7517777
Email: info@normedico.com

C-K JECT

N A N O - T E C H N O L O G Y

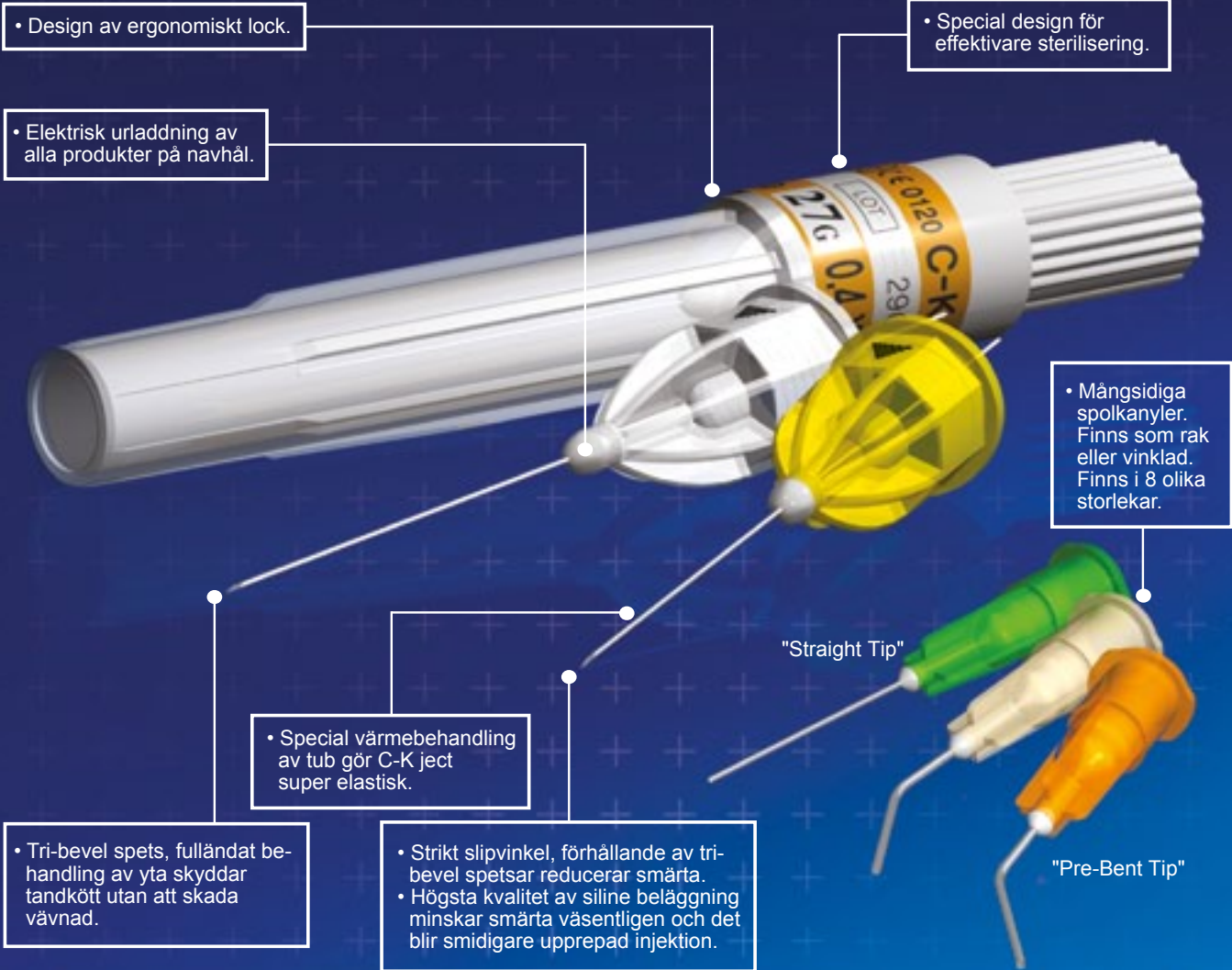

Specifikation: Injektionskanylet

27G	21mm (0.4 × 21mm)	25mm (0.4 × 25mm)	30mm (0.4 × 30mm)	35mm (0.4 × 35mm)	38mm (0.4 × 38mm)	40mm (0.4 × 40mm)
30G	12mm (0.3 × 12mm)	16mm (0.3 × 16mm)	21mm (0.3 × 21mm)	25mm (0.3 × 25mm)	30mm (0.3 × 30mm)	
31G	8mm (0.26 × 8mm)	12mm (0.26 × 12mm)				

Specifikation: Spolkanylet

18G	15mm (1.2 × 15mm)	Vinklad	25mm (1.2 × 25mm)	Rak
19G	15mm (1.1 × 15mm)	Vinklad	25mm (1.1 × 25mm)	Rak
20G	15mm (0.9 × 15mm)	Vinklad	25mm (0.9 × 25mm)	Rak
30G	15mm (0.3 × 15mm)	Vinklad	25mm (0.3 × 25mm)	Rak