

TopScore ROM - Post-op kneortose

ART.NO 70645

Postoperativ kneortose brukes som en stabiliserende eller immobiliserende ortose etter skade eller kirurgi av kneleddet for kontroll av fleksjon/ekstensjon og medial/lateral stabilitet. Utviklet for å muliggjøre rask og enkel utprøving etter skade/operasjon.

Innsiden av ortosen er forsynt med myk polstring, som med god friksjon griper om beinet og får ortosen til å sitte på plass. Kuttede stropper med trykknapper gjør det enkelt å prøve og ta på seg for pasienten. Skinnene kan innsnevres for å tilpasses hver pasient individuelt.

Med den teleskopiske mekanismen kan ortosens lengde justeres, fra 48 cm til 63,5 cm. Ekstensjon og fleksjon kan justeres og låses fra 0° til 45° i intervaller på 10°/15°. Kontrollert bevegelsesområde mellom 0° og 120° bestemmes enkelt med en trykknapp i intervaller på 10°/15°. Innstillingen kan sikres med de medfølgende kabelbåndene.

Indikasjoner: Postoperativ stabilisering. Posttraumatisk stabilisering. For kontroll av bevegelsesområdet etter kirurgi av ACL, PCL, MCL og LCC, menisk, patella, slitasjegikt, stabil lårbenkondylbrudd, total kneutskifting og tibia kondylbrudd.

MERK! Skal bare brukes etter medisinsk undersøkelse og anbefaling for bruk av kvalifisert medisinsk helsepersonell.

Størrelse: Universell størrelse.

Materiale: Aluminium, skummateriale, borrelås. Inneholder ikke lateks.

Vaskeinstruksjoner: Polstring - Finvask 30° C. For best holdbarhet anbefales håndvask, plantetørr. Skinnene og skjøtende - vaskes av med en klut og varmt vann/milt desinfeksjonsmiddel.


Størrelse	Art.no
Universal	70645-00-50
Tillbehør	Art.no
Polstring	70645-00-55
Band	70645-00-65



Med den teleskopiske mekanismen kan ortosens lengde justeres, fra 48 cm til 63,5 cm.



Forlengelse og fleksjon kan justeres og låses fra 0° til 45° i intervaller på 10°/15°. Kontrollert bevegelsesområde mellom 0° og 120° bestemmes enkelt med en trykknapp i intervaller på 10°/15°.

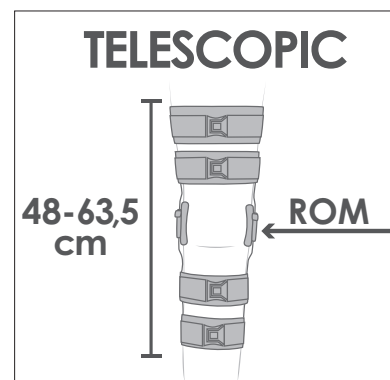

MD Class I CE