

GeniX ROM - Polviortoosi

TUOTENRO 70646

Postoperatiivinen polvituki, jota käytetään polvinivelen vamman tai leikkauksen jälkeen, kun tarvitaan hallittua liikerataa tai polvinivelen täydellistä immobilisaatiota. Tuki on kehitetty mahdollistamaan nopea ja helppo sovitusta vamman tai leikkauksen jälkeen. GeniX ROM on erittäin kevyt ja mukava käyttää.

Teleskooppimekanismin avulla ortoosin pituutta voidaan säätää noin 45 cm:stä 64 cm:iin, 0,8 cm:n välein. Kiskoja ja mansetteja voidaan taivuttaa, jotta ne voidaan sovittaa yksilöllisesti jokaiselle potilaalle. Kaikki mansetit ovat siirrettäviä. Ortoosin sisäpuolella on pehmeä pehmuste ja liukumista estävä silikonipinta, joka auttaa ortoosia pysymään hyvin paikallaan. Leikattavat nauhat ja pikalukot helpottavat sovitusta sekä ortoosin pukemista ja riisumista potilaalle.

Liikerata voidaan säätää ojennukselle -10°-90° ja taivutukselle 0°-120°, molemmat 10°:n välein. Turvallinen ROM-säädin on turvallinen eikä muutu itsestään käytön aikana. Nivelen pikalukko lukitsee ROM:n väliin -10°-30°.

Käyttöaiheet: Leikkauksen jälkeinen ja trauman jälkeinen polvinivelen immobilisointi/stabilointi.

Vasta-aiheet: Ei tarkoitettu yli 110 kg painaville henkilöille.

Materiaali: Alumiini, polyoksimetyyleeni, polyamidi, polyuretaani, viskoosi, elastaani, silikonit.

Pesuhjeet: Tekstiilipehmusteet: Hienopesu 40°C. Parhaan kestävyys saavuttamiseksi suositellaan käsinpesua ja tasokuivausta.
Kiskot ja nivel: Pyyhi liinalla ja lämpimällä vedellä/ miedolla desinfiointiaineella.

Koko	Tuotenumero
GeniX ROM Universal	706460050


Lisävarusteet	Tuotenumero
GeniX ROM Straps (remmit)	706460054
GeniX ROM Padding (pehmuste)	706460055



Alumiinista valmistetut mansetit voidaan muotoilla jalan mukaan.



Nopeat kiinnikkeet nauhoissa.

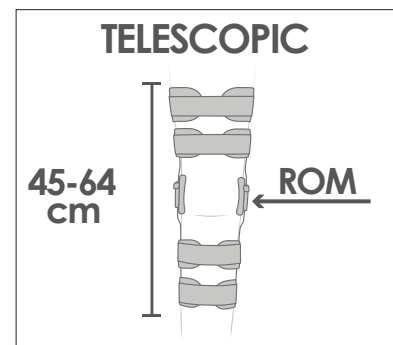

MD Class I CE