

GeniX ROM - Kneortose

ART.NO 70646

Postoperativ kneortose som benyttes etter skade eller kirurgi i kneleddet, når kontrollert bevegelsesutslag eller full immobilisering av kneet er nødvendig. Ortosen er utviklet for å muliggjøre rask og enkel tilpasning etter skade eller kirurgi. GeniX ROM har svært lav vekt og er behagelig å bruke.

Med teleskopmekanismen kan lengden på ortosen justeres fra ca. 45 cm til 64 cm, i trinn på 0,8 cm. Skinnene og mansjettene kan bøyes for individuell tilpasning til hver pasient. Alle mansjetter er avtakbare. Innsiden av ortosen er utstyrt med myk polstring samt et skliskikkert silikonbelegg som bidrar til at ortosen holder seg på plass. Klippbare stropper med hurtigspenner forenkler tilpasning samt av- og påtaking for pasienten.

Bevegelsesområdet kan stilles inn for ekstensjon fra -10° til 90° og fleksjon fra 0° til 120°, begge i intervaller på 10°. ROM-innstillingen er sikker og endres ikke utilsiktet under bruk. Hurtiglås muliggjør fiksering av ROM i området fra -10° til 30°.

Indikasjoner: Postoperativ og posttraumatisk immobilisering og stabilisering av kneleddet.

Kontraindikasjon: Ikke beregnet for personer med kroppsvekt over 110 kg.

Material: Aluminium, polyoksymetylen, polyamid, polyuretan, viskose, elastan, silikon. Lateksfri.

Vaskeråd: Tekstil polstring: Vask ved 40°C, for best holdbarhet anbefales håndvask, tørkes liggende. Skinnende og skjøter: Vaskes av med klut og varmt vann, mild desinfeksjonsmiddel.

Størrelse	Art.no
GeniX ROM Universal	706460050


Tillbehør	Art.no
GeniX ROM Straps	706460054
GeniX ROM Padding	706460055



Aluminiumsmansjettene kan formes slik at de passer til beinet.



Hurtigspenne på stroppene.

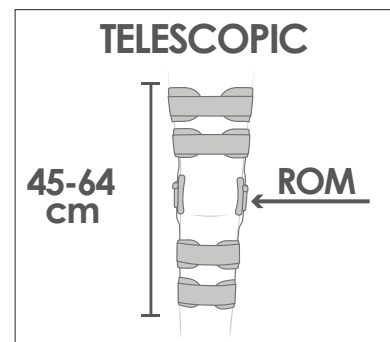

MD Class I CE