

Skulder & arm

FRAKTURORTOSER OG SLYNGER



NordiCare[®] +

Unike funksjoner for individuelle behov

NordiCare ortoser og løkker er designet for å hjelpe og stabilisere i ulik grad av svakhet eller ustabilitet, men brukes også til smertelindring eller bruddbehandling. Alle har unike funksjoner og fordeler som lar deg gi eller motta en fullstendig tilpasset behandlingsplan, basert på individuelle behov.

Menneskenær design

En sentral del av NordiCares produktutvikling er funksjon og brukervennlighet - vår drivkraft er å utvikle funksjonelle produkter i tiltalende design som gjør hverdagen enklere for både brukere og helsepersonell. Vi kaller det "Menneskenær Design".

Nøye valgt

NordiCares sortiment er utviklet i tett samarbeid med fysioterapeuter, leger og brukere. Det er også et tett samarbeid med internasjonalt ledende produsenter av materialer og produsenter av helseprodukter. Utvalget utvikles kontinuerlig der valg av samarbeidspartnere er minst like viktig som deres eget design- og utviklingsarbeid. Kunden skal alltid føle seg trygge når det gjelder valg av NordiCares produkter når det gjelder produktkvalitet, funksjon og miljøpåvirkning. Vi kaller dette "Nøye valgt".

Bedret helseøkonomi

Basert på de begrensede ressursene som er tilgjengelig for helsevesenet, blir viktigheten av en bedret helseøkonomi stadig viktigere. Det er viktig for helsevesenet å søke både økonomiske og effektive løsninger. Derfor er det et viktig mål for NordiCare å utvikle kostnadseffektive produkter som kan bidra til en bedret helseøkonomi som kortere pleietid og mer effektiv behandling.



Frakturortoser

HumerusComfort + Extend - Frakturortose


Stabile frakturortoser i to forskjellige lengder, designet for å kontrollere humerus-segmentet ved sirkulær kompresjon av de myke delene. De brukes i ikke-operativ behandling av lukkede skaffrakturer i humerus og i postoperativ behandling av åpne skaffbrudd på humerus. For mer distalt lokaliserte diafysehumerusfrakturer og på lange overarmer anbefales HumerusComfort Extend, som er litt lengre enn HumerusComfort.

Ortosen lindrer smerte og tillater bevegelse i skulderleddet og albueleddet. Tekstilskulderdelen gjør at ortosen sitter komfortabelt og sikkert på plass. Integreerte støpte plater gir stabilitet og sirkulær kompresjon i henhold til Sarmiento-prinsippet. Tilgjengelig i sort i størrelsene S-XL. Art.nr 20220 og Extend 20224.

✓ Standard ortose for diafysære frakturer



Behandler diafysære humerus frakturer

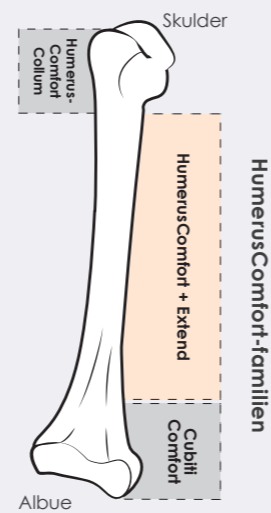

Passer både høyre og venstre arm.



HumerusComfort Kid

Omslutter skulderen

Sitter komfortabelt og trygt med brede stropper



De støpte platene bidrar til jevn kompresjon for å stabilisere bruddet



Sirkulær kompresjon i henhold til Sarmiento-prinsippet

Sarmiento-prinsippet

Sarmiento-prinsippet er et behandlingskonsept hvor frakturen stabiliseres gjennom kompresjon av bløtvev. Sirkulær kompresjon rundt overarmen opprettholder frakturens alignment samtidig som det tillater bevegelse i skulder- og albueleddene. Dette fremmer funksjonell bedring, bevarer mobilitet og støtter tidlig tilbakeføring til daglige aktiviteter.



CubitiComfort - Frakturortose

Stabil og komfortabel helarmortose brukt i bruddbehandling og/eller rehabilitering. Ortosen er individuelt tilpassningsdyktig og lindrer smerter og gir mulighet for mobilitet i skulder og albue. Albuefleksjon eller forlengelse kan justeres med intervaller på 15° og låses i ønsket stilling. Brede sirkulære strimler sammen med støpte plater gir jevn kompresjon og lettelse. Den tekstile skulderseksjonen gjør at ortosen passer komfortabelt og sikkert på plass. Lengden kan justeres uendelig. Passer både til høyre og venstre arm. Finnes i hvit og S-XL. Art.no 20222.

✓ Perfekt ved multitraume og postoperativt



Justerbar fleksjon/ekstensjon i albueleddet.



HumerusStabil Kort Frakturortose

Frakturortose i kort modell. Brukes til behandling av skafffrakturer på humerus, etter intern fiksering og i alvorlig hevelse. Passer både høyre og venstre. Tilgjengelig i S-XL. Art.no 20211.



HumerusStabil Lang Frakturortose

Frakturortose designet for å kontrollere segmentene av humerus ved å komprimere de myke delene. Brukes til behandling av akselfrakturer i humerus etter intern fiksering og i alvorlige hevelse. Passer både høyre og venstre. Tilgjengelig i XS-2XL. Art.no 20210.



De fleste av NordiCares tekstil skulder- og armortoser kan vaskes i 40 grader eller mer. Det er klare vaskeanvisninger på emballasjen og også på vår hjemmeside.



Prøv en større eller mindre ortose hvis dimensjonene er mellom to størrelser, eller hvis ortosen ikke passer perfekt. Detaljert prøveinformasjon finner du på emballasjen og på vår hjemmeside.

Armslynger og skulderfiksering

HumerusComfort Collum - Armslynge

Armslynge med funksjon for å avlaste og posisjonere skulderleddet. Ved å plassere skulderleddet i en så losset stilling som mulig, med liten innflytelse på muskelen i skulderleddet, oppnås gode betingelser for helbredelse og smertelindring. Brukes i proksimale humerus brudd i stedet for "normal" armsløyfe. Kan brukes i kombinasjon med HumerusComfort Extend for humerus frakturer der ekstra stabilitet er ønsket. Tilgjengelig for høyre og venstre arm i universell størrelse. Art.no 20225.

✓ Smertelindring og plassering i lettet stilling



Komfortabel og stabil i ryggen.



Lett å åpne for eksempel trening.

"Gir en trygg og følelse under hele dagen og natten"

Skulderleddet er plassert i en avlastet stilling



QuickSling - Armslynge

Polstret bånd levert på rull. Den ønskede lengden kuttes for å passe til pasienten. Justert med Y-formatet borrelås. Passer både venstre og høyre arm. Art.no 20118.



ComfortSling - Armslynge

Brukes ved kortere behandlingstid og passer til ulike størrelser, også barn. Det elastiske materialet former seg etter armen, og et tumbånd hjelper til med å holde armen i posisjon. Passer til både venstre og høyre arm. Art.no 20111.



DuoQuick - Skulderfiksering

Myk og luftig skulderlås som gir fiksering, støtte og avlastning. Myk tommelrem hindrer rotasjon av underarmen og polstrede og justerbare stropper låser armen. Passer både venstre og høyre arm. Art.nr 20124.

Armslynger og skulderfiksering



DuoPlus - Skulderfiksering

Immobiliserer og lindrer skulderleddet uten å anstrenge nakken. Brukes ved akutt skade eller etter operasjon. To stropper krysses over ryggen og fordeler vekten over begge skuldrene. Bred avtakbar stropp med borrelås fester armen til bagasjerommet. Passer både venstre og høyre arm. Tilgjengelig i S-XL. Art.no 20113.

✓ Belaster ikke nakken



DuoTrain - Skulderfiksering

Gir stabil fiksering og lindring i akutt eller etter operasjon. Ekstra sterke borrelåsfester med sliateplater gjør at DuoTrain's festemidler kan åpnes og lukkes mange ganger og anbefales derfor under rehabilitering. Skulderremmen er justerbar i høyden og sideveis langs midten og festet med borrelås. Justerbar immobiliseringsrem rundt kroppen. Passer både venstre og høyre arm. Tilgjengelig i S-XL. Art.no 20119.

✓ Perfekt ved reabhtraining



Duo - Skulderfiksering

Fester skulderen og gir støtte og lettelse for smerterelaterte skulderproblemer i tilfelle akutte skader eller traumer når en enklere skulderlås er ønsket. Justerbare skulder- og skulderremmer festet med borrelås. Immobiliseringsstropper som låser overarmen til bagasjerommet er inkludert. Et mykt tommelbånd holder løkken på plass og sikrer at armen holdes i riktig posisjon. Passer både venstre og høyre arm. Tilgjengelig i S-XL. Art.no 20114.

✓ En god allroundslynge

SmartCuff - Skulderfiksering

Gir behagelig støtte og lettelse av armen og skulder etter planlagte operasjoner. Låser effektivt arm og skulder. Anbefales for rehabilitering. Håndleddsmansjette åpnes deretter separat for å frigjøre armen uten å endre den faste posisjonen til overarmen. Enkelt for pasienten å fjerne, justere og justere. Ekstra kilepute inkludert for posisjonering / bortføring. Passer både høyre og venstre arm. Tilgjengelig i S/M og L/XL. Art.no 20120.

✓ Etter planlagte operasjoner



Lindrer effektivt skulder / arm.



Abduksjonortose



Shoulder ABDuction Pillow 15° - Abduksjonsortose

Gir støtte og immobilisering etter operasjon eller ustabil skulder. En pute holder armen/skulderen immobilisert i 15° abduksjon. Det avlastende 3-punkts-systemet er lett å påføre. Den myke armposen kan åpnes raskt for armmobilisering, trening eller personlig hygiene. Passer både venstre og høyre arm. En ekstra hygienestropp for armhulen er inkludert. Tilgjengelig i S-XL. Art.no 20130.

✓ Behagelig immobilisering

Albueortoser

E-motion - Albueortose

Gir postoperativ eller posttraumatisk stabilisering og kontrollert bevegelsesområde eller mobilisering av arm og albue. Ortoesen føles behagelig og trygg å ha på. Teleskopmekanisme gjør det enkelt å justere lengden. Ekstensjon kan justeres og fikses fra 0° til 90° og fleksjon fra 0°-120° i intervaller på 10°. Et avtagbart håndstykke gir pronasjons- og supinasjonskontroll, og en skuldersrem kan brukes for ekstra armstøtte. Tilgjengelig for høyre og venstre arm i universell størrelse. Art.no 20206.

✓ Formbare mansjetter for perfekt passform



Skulderrem for ekstra avlastning.



Stabil avtagbar hånddel for fiksering og begrensning av rotasjon.

Størrelser og mål

HumerusComfort & HumerusComfort Extend

Art.no	Størrelse	Omkrets	Lengde
20220-00-40	S	20-27 cm	29-34 cm
20224-00-40	S Extend		32-36 cm
20220-00-50	M	25-32 cm	32-36 cm
20224-00-50	M Extend		34-38 cm
20220-00-60	L	30-40 cm	34-38 cm
20224-00-60	L Extend		36-40 cm
20220-00-70	XL	38-48 cm	36-40 cm
20224-00-70	XL Extend		38-42 cm

CubitiComfort

Art.no	Størrelse	Overarm	Underarm	Total Lengde
20222-09-40	Small	14-23 cm	18-26 cm	46-54 cm
20222-09-50	Medium	23-32 cm	23-32 cm	50-58 cm
20222-09-60	Large	30-39 cm	28-38 cm	52-60 cm
20222-09-70	X Large	38-50 cm	28-38 cm	52-60 cm

Tilbehør, Axilla Kit HC

Art.no	Størrelse	Lengde indre skall
20219-00-40	Small	12 cm
20219-00-50	Medium	14 cm
20219-00-60	Large	16 cm
20219-00-70	X Large	18 cm



Tilbehør, ekstra lattor

Art.no	Størrelse	Antal
20221-00-40	Small	4 st
20221-00-50	Medium	4 st
20221-00-60	Large	4 st
20221-00-70	X Large	4 st



Duo

Art.no	Størrelse	Lengde albue og fingertupp cm
20114-06-40	Small	35-41
20114-06-50	Medium	40-44
20114-06-60	Large	43-49
20114-06-70	X Large	48-55

DuoTrain

Art.no	Størrelse	Lengde albue og fingertupp cm
20119-06-40	Small	35-41
20119-06-50	Medium	40-44
20119-06-60	Large	43-49
20119-06-70	X Large	48-55

SmartCuff

Art.no	Størrelse	Mål under bysten
20120-00-50	Universal	< 130 cm

Shoulder ABDuction Pillow 15°

Art.no	Størrelse	Lengde underarm
20130-00-40	S	34-38 cm
20130-00-50	M	37-43 cm
20130-00-60	L	42-48 cm
20130-00-70	XL	48+ cm

HumerusStabil Kort

Art.no	Størrelse	Omkrets distalt	Omkrets proksimalt
20211-09-40	Small	18-23	23-28
20211-09-50	Medium	23-28	28-33
20211-09-60	Large	28-33	33-38
20211-09-70	X Large	33-38	38-43

HumerusStabil Lång

Art.no	Størrelse	Omkrets distalt	Omkrets proksimalt
20210-09-30	X Small	13-18 cm	18-23 cm
20210-09-40	Small	18-23 cm	23-28 cm
20210-09-50	Medium	23-28 cm	28-33 cm
20210-09-60	Large	28-33 cm	33-38 cm
20210-09-70	X Large	33-38 cm	38-43 cm
20210-09-80	2X Large	38-43 cm	43-48 cm

HumerusComfort Collum

Art.no	Størrelse
20225-10-50	Universal venstre
20225-20-50	Universal høyre

QuickSling

Art.no	Størrelse venstre / høyre
20118-00-50	Universal

ComfortSling

Art.no	Størrelse venstre / høyre
20111-09-50	Universal

DuoPlus

Art.no	Størrelse	Lengde underarm	Bål + overarm
20113-06-40	Small	35-40 cm	60-80 cm
20113-06-50	Medium	39-44 cm	80-95 cm
20113-06-60	Large	43-48 cm	95-115 cm
20113-06-70	X Large	47-54 cm	115-145 cm

E-motion

Art.no	Side
20206-10-50	Venstre
20206-20-50	Høyre

DuoQuick

Art.nr	Størrelse	Lengde
20124-00-30	XS	30-35 cm
20124-00-40	S	35-40 cm
20124-00-50	M	39-44 cm
20124-00-60	L	43-49 cm
20124-00-70	XL	48-55 cm

NordiCare ortopedi & rehab AB er et svenskt firma som utvikler og markedsfører nøye utvalgte ortopedi og rehabprodukter. En sentral del i NordiCares produktutvikling er funksjon og brukervennlighet. Vår drivkraft er å ta frem funksjonelle produkter i tiltalende design som gjør hverdagen enklere for bruker som det medisinske helsepersonell.



NordiCare[®] +

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • 263 62 Viken, Sverige
• info@nordicare.se • +46 (0)42-35 22 20 • www.nordicare.se