

Gördlar

FÖR STOMI, POSTOP & BRÅCK

NordiCare[®] +

Gördlar för olika behov

NordiCare erbjuder ett brett sortiment av gördlar som kan användas genom hela vårdcykeln – direkt efter operation och till eftervård. Vi har också flera olika varianter av gördlar för permanent bruk som fungerar som hjälpmedel för dig med bräck eller stomi.

Produkterna är utvecklade med användarvänlighet i fokus utifrån både brukaren och den medicinska professionens perspektiv. Vårt sortiment är noga utvalt för att uppfylla kraven på funktionalitet, kvalitet och hälsoekonomi inom vården.

NordiCares gördlar delas här in utifrån tre huvudsakliga användningsområden, stomi, postop och bräck. Dock kan många av gördlarna användas till mer än ett område och presenteras då i flera avsnitt. I produktbeskrivningen kan dessutom flera passande användningsområden anges.

Stomi – För fixering och avlastning av stomi.

Postop – För tidig mobilisering, smärtlindring och minskad risk för komplikationer efter operation.

Bräck – Stöd och avlastning för olika typer av bräck.



Passar barn & vuxen



Justerbar storlek & kompression



Vändbar, universal höger/vänster



Hål för stomi



Utan sömmar



4-vägsstretch



Klippbart material ingen söm behövs

Hitta rätt gördel

Våra gördlars egenskaper och utformning skiljer sig för att passa för olika användningsområden och kroppstyper. Vi vill att det ska vara enkelt att välja rätt gördel. Därför har vi valt att göra en enkel indikering för varje gördels grad av kompression och stöd. Vi använder tydliga symboler för att enkelt och snabbt visa på gördlarnas funktioner och användningsmöjligheter.

Kompression

Kompression används för att minska risken för postoperativa komplikationer. Användning av kompression motverkar svullnad, infektioner samt risk för bråckbildning. Lättare kompression ger smärtlindring och är lämplig för fixering av förband och stomibandage. Kompressionen i en elastisk gördel kan regleras genom hur hårt den sätts på. Materialets tjocklek och elastiska förmåga ger olika typer av komprimerande egenskaper.

Avlastning

Avlastning ges genom kompression i kombination med stöd. En avlastande gördel ger ett extra mothåll som fungerar som stöd runt exempelvis en stomi, åt ett bråck eller en försvagad buk. Stödet minskar belastningen av området. För att ge våra gördlar avlastande egenskaper kombinerar vi ofta elastiska material med kraftigare och i vissa fall oelastiska textilier. Effekten blir ett effektivt stöd i kombination med ett justerbart tryck. En kraftigare elastik ger mer avlastning än ett tunnare elastiskt material. Samtliga produkter i den här broschyren är latexfria.



 1-3. Lätt till stark kompression.

 1-3. Lite till mycket avlastning.




STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifierade produkter innehåller inte kemikalier i halter som är hälsoskadliga.



MD Class I

Stomi För fixering och effektivt stöd

NordiCares stomigördlar ger fixering och stöd, samtidigt som de är sköna att bära. Modellerna passar olika behov och ger rätt typ av avlastning oavsett användningsområde. Man kan välja en mjukare gördel över stomipåsen eller en stadigare gördel under, med hål i. Studier visar att en gördel som ger stöd åt bukväggen minskar risken för att utveckla bråck efter en stomioperation.*

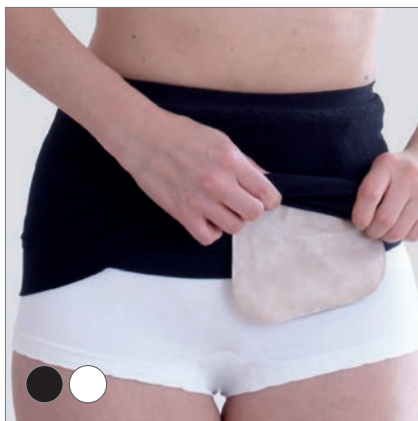

StomiFix

Mjuk sömlös fixeringsgördel som håller stomibandaget på plats. Gördeln har dubbelt material, det innersta lagret har hål för stomibandaget och det yttersta dras över stomibandaget som en ficka. Passar för stomi på höger eller vänster sida. StomiFix är designad som en "tub" utan knäppning, som man går i och ur. OEKO-TEX®. Finns i vit och svart. Art.nr 50217.

✓ **Extra mjukt material**



StomiMini

Mjukt fixeringsband med enkel kardborreförslutning. Följsamt elastiskt material som andas och känns behagligt mot huden. Reglerbar i storlek och tryck med kardborren som fäster över hela bandet. Diskret under kläderna. För omkrets upp till 120 cm. Säljs i 3-pack i svart eller vitt. Höjd 7,5 cm, art.nr 50213.

✓ **Universal storlek**




Figur

Bekväm rak gördel. Lämplig som mjuk stomigördel över stomibandaget. Minskar risken för bråck samt ger stöd åt mindre bråck. Enkel att applicera och försluts med bred kardborrelåsning, vilket gör den lätt att justera till önskat stöd. Materialet är mjukt och luftigt. Vändbar. OEKO-TEX®. Höjd 16 cm art.nr 50221 (vit), höjd 20 cm art.nr 50222 (svart), höjd 25 cm art.nr 50202 (vit), höjd 32 cm art.nr 50203 (vit).

✓ **Finns i 4 höjder**



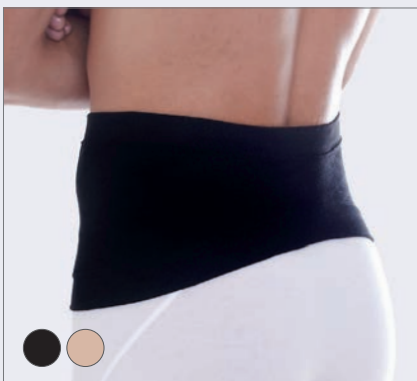

StomiTube

Mjuk sömlös fixeringsgördel i stickat material. Gjord som en tub man går i och ur. Bra passform för olika figurtyper då formen är smalare i ryggen. Syns inte under kläderna. Gördeln gömmer och håller påsen på plats. Passar för stomi på höger eller vänster sida. OEKO-TEX®. Säljs i 3-pack i svart eller beige. Höjd fram 18 cm, bak 11 cm. Art.nr 50214.

✓ **Extra mjukt material**



StomiTube

Stomi

För fixering och effektivt stöd



StomiSoft

Rak, elastisk stomigördel som ger ett bekvämt stöd vid stomi eller stomibräck. Enkel att försluta och justera med handtag och kardborre som fäster över hela den oelastiska fronten. Det gör gördeln flexibel i omfångsmått och tryck. Möjligt att klippa hål i frontpartiet. Vändbar. OEKO-TEX®. Höjd 16 cm art.nr 50219, höjd 20 cm art.nr 50218.

✓ **Finns i 2 höjder**



StomiSoft 20






StomiBas

Rak, stadig stomigördel som ger mothåll och avlastning. Även för stöd vid parastomala bräck. Individuellt anpassat hål kan klippas i det oelastiska frontmaterialet som varken fransar eller töjer sig vid klippt hål. Passar rak figurtyp. Vändbar och med handtag. Höjd 16 cm art.nr 50211. Höjd 20 cm art.nr 50212. Höjd 25 cm art.nr 50210.

✓ **Finns i 3 höjder**

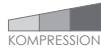

Form

Rak, stadig gördel, lämplig som kraftigare elastisk stomigördel. Stödjer över stomi och stomipåse. Vid användning som stomigördel kan eventuellt en större storlek användas för att undvika alltför hög kompression över påsen. Vändbar. Finns i svart och ljusgrå. Höjd 15 cm art.nr 50209, höjd 20 cm art.nr 50220, höjd 25 cm art.nr 50204.

✓ **Finns i 3 höjder**



ViraRak

Rak gördel i extra stadigt material som ger kraftigt stöd och kompression. Fästytans kardborreband är elastiska vilket gör att gördeln formar sig fint för olika figurtyper. Den långa fästytan gör gördeln flexibel i storlek och kan justeras för mer eller mindre kompression. Vändbar. OEKO-TEX®. Höjd 15 cm art.nr 50230, höjd 20 cm art.nr 50231.


✓ **Finns i 2 höjder**



LyftPlus Stomi

En stadig abdominal gördel med format magparti för att passa en kraftigare buk. Oelastisk front ger ett effektivt stöd och lyft. Används vid bräck, stomi eller efter operation. Justerbar passform med kardborre och handtag. OEKO-TEX®. Höjd 28 cm fram och 15 cm bak. Art.nr 50207.

✓ **Format magparti**

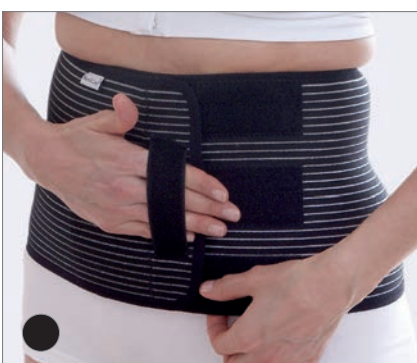


Smidig

Formbar gördel som ger ett stadigt stöd. Lämplig vid stomi, postoperativt samt vid mindre bräckproblematik. Enkel att applicera, försluta och justera med handtag och kardborre i fronten. Lång fästytan gör den flexibel i omfångsmått och stöd. Luffigt material som andas och formar sig efter olika figurtyper. Vändbar. Art.nr 50247.

✓ **Enkel att ta på och justera**

✓ **Smidigt och luffigt material**

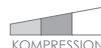

Postop

För hög funktionalitet och enkel applicering

Genom effektivt stöd och kompression ger våra postoperativa gördlar smärtlindring, snabbare mobilisering och minskad risk för komplikationer efter kirurgiska ingrepp. Många av gördlarna kan även användas vid olika typer av bräckproblematik. De är enkla att anpassa och applicera och finns i olika höjder, material och med olika kompressionsgrader. NordiCares gördelsortiment är utvecklat med fokus på mångsidighet och funktion för både sjukvårdspersonal och användare.



AbdoCare

Ger effektiv avlastning och kompression. Med kardborren som fäster över hela gördeln är det enkelt att justera storlek, kompressionsgrad och form. En storlek kan användas som universalstorlek. Sydd i V-form för bättre passform. Kan även användas över bröstkorgen. Höjd 23 cm art.nr 50225, höjd 30 cm art.nr 50226, höjd 37 cm art.nr 50237.

- ✓ **Finns i 3 olika höjder**
- ✓ **Universalstorlek**





AbdoBas

Rak gördel som ger effektiv avlastning och kompression. Enkel att applicera och justera med handtag och kardborre. Oelastisk klippbar front i foam-material avlastar och ger stöd. Tvättbar i 95 grader. Art.nr 50236.

- ✓ **Handtag för enkel applicering**
- ✓ **Färgmarkerad storleksindikation**




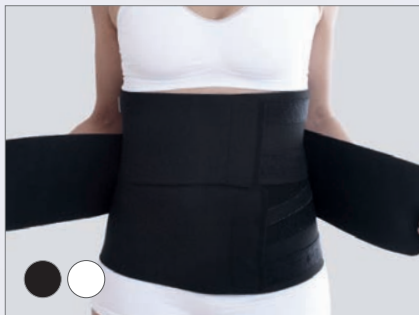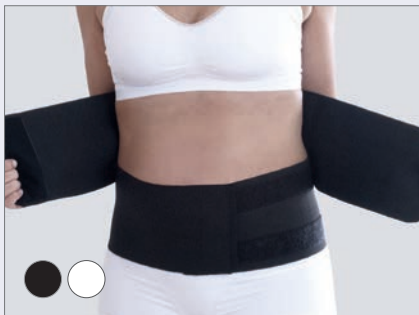

Vira x2, Vira x3 och ViraKing

Gördel i extra stadigt material. Enkel att applicera och justera till önskad passform och kompression med två eller tre dragband. För postoperativ vård efter bukoperation, bukplastik och/eller fettsugning. Kan även användas vid olika typer av bråckproblematik. Avlastar sår, smärtlinjor samt möjliggör tidig mobilisering. Det stadiga materialet håller formen utan att vecka sig. Slät och mjuk mot huden utan irriterande sömmar eller kanter. Inga skenor. Passar både svängd och rak figur. OEKO-TEX®. Finns i vit och svart. Vira x2 art.nr 50228, Vira x3 art.nr 50227, ViraKing art.nr 50229 finns endast i svart.

✓ **Finns med två eller tre dragband**

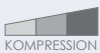

Vira x2

Postop

För hög funktionalitet och enkel applicering



Figur

Bekväm, rak gördel med mjukt material och bred fästyta. Används postoperativt för att avlasta sår och fixera förband. Enkel att applicera och försluts med bred kardborre som lätt justerar önskat stöd. Vändbar. OEKO-TEX®. Höjd 16 cm (vit) art.nr 50221, höjd 20 cm (svart) art. nr 50222, höjd 25 cm (vit) art.nr 50202, höjd 32 cm (vit) art.nr 50203.

✓ **Finns i 4 olika höjder**



Form

Rak gördel i kraftigare elastik som ger kompression och stöd. Den är enkel att applicera och försluts med kardborre. Används vid postoperativ vård för att avlasta sår, samt vid bråckproblematik eller som bröstband. Vändbar. Finns i svart och ljusgrå. Höjd 15 cm art.nr 50209, höjd 20 cm art. nr. 50220, höjd 25 cm art.nr 50204.

✓ **Finns i 3 olika höjder**




Mika

Mjukt fixeringsband för förbandsmaterial, stomibandage eller som bröstband. Följsamt elastiskt material som andas och känns behagligt mot huden. Reglerbar i storlek och tryck med kardborren som fäster över hela bandet. Diskret under kläderna. Vändbar. Finns i vit. Höjd 15 cm. Art.nr 50224.

✓ **Finns i 2 storlekar**




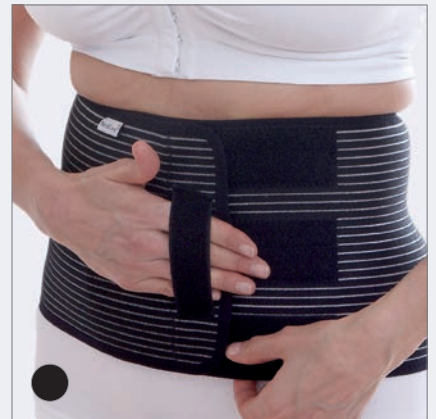

Smidig

Formbar gördel som ger ett stadigt stöd. Lämplig som både postoperativ och permanent gördel samt vid mindre bråckproblematik. Enkel att applicera, försluta och justera med handtag och kardborre i fronten. Lång fästyta gör den flexibel i omfångsmått och stöd. Passar särskilt bra när storleken behöver justeras över tid, som vid postoperativ svullnad efter graviditet. Luftigt material som andas och formar sig efter olika figurtyper. Vändbar. Art.nr 50247.

- ✓ Enkel att ta på och justera
- ✓ Smidigt och luftigt material

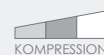

Gördel används postoperativt efter många olika typer av kirurgiska ingrepp. Vid stora snitt eller för patienter med försvagad bukvägg behövs ett kraftigt stöd för avlastning under läkningsperioden. En gördel smärtlindrar och hjälper

till att förhindra bråckbildning och andra komplikationer. Gördeln används också för att hålla förband på plats. Efter fettsugning eller bukplastik används ofta en kompressionsgördel för att förbättra läkningen och resultatet.

Postop och bråck

För kraftigare buk

Lyft-görlarna är en familj stadiga abdominala gördlar med format magparti. De ger bekvämt och effektivt stöd och lyft för personer med en lite kraftigare buk. Gördlarna används i samband med olika typer av operationer, bråckproblematik eller stomi.

Omsluter och formar sig efter magen

Handtag för enkel applicering

LyftPlus Comfort






Lyft

Stödjande gördel med format magparti och elastisk front och rygg. Passar en lite kraftigare buk och används vid mindre bråck, stomi, eller efter bukoperationer för att förhindra ärrbråck. Två skenor stärker upp i ryggen. Finns i svart. Höjd fram 24 cm, mitt bak 23 cm. Art.nr 50206.


- ✓ **Helt elastisk**

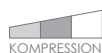

LyftPlus Stomi

En stadig gördel med format magparti och elastisk rygg. Den oelastiska fronten är klippbar. Passar en lite kraftigare buk och används vid bråck, stomi, efter operation eller som fixering av stomibandage. Finns i svart. Höjd 28 cm fram och 15 cm bak. Art.nr 50207.

- ✓ **Oelastisk klippbar front**

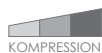


LyftPlus Comfort

En stadig gördel med format magparti, elastisk rygg och oelastisk luffig front. Passar en lite kraftigare buk och används vid bråck, stomi eller efter operation. Två skenor i ryggen. Finns i svart. Höjd fram 30-32 cm, bak 20 cm. Art.nr 50157. För individuell tillpassning finns Comfort-modellen som semifabrikat och heter LyftPlus Special art.nr 50208.

- ✓ **Högre gördel**

- ✓ **Oelastisk front**

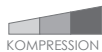

Studie visar på signifikant minskad smärta

Studien "Effect of an elastic girdle on lung function, intra-abdominal pressure, and pain after midline laparotomy: a randomized controlled trial" av L. Clay, U. Gunnarsson, K. A. Franklin och K. Strigård, visar att patienter som genomgår laparotomi och använder en individuellt utprovad prefabricerad gördel postoperativt, har signifikant minskad smärta jämfört med patienter utan gördel. I studien användes LyftPlus från NordiCare. Att använda gördel kan därmed ses som en kostnadsbesparande åtgärd, i och med lägre morfindosering och snabbare mobilisering.

Studien godkändes i januari 2014 och är publicerad i International Journal of Colorectal Disease.

Bråck

För effektivt stöd och avlastning vid bukväggsbråck

Våra stadiga bråckgördlar ger effektiv avlastning och stöd vid olika typer av bukväggsbråck. Gördlar kan användas som konservativ behandling eller i väntan på operation för att hålla tillbaka bråcket och ge stöd till en försvagad bukvägg. Våra gördlar finns i olika höjder och material för att passa olika behov och figurtyper. För en kraftigare buk rekommenderar vi Lyft-serien med format magparti.



Smidig

En formbar gördel som ger ett stadigt stöd. Lämplig vid bråckproblematik. Enkel att applicera, försluta och justera med handtag och kardborrefäste i fronten. Lång fästyta gör den flexibel i omfångsmått och stöd. Luftigt material som tillåter huden att andas. Formar sig lätt för olika figurtyper. Vändbar. Art. nr 50247.

- ✓ Enkel att ta på och justera
- ✓ Luftigt material



ViraRak

Rak gördel i extra stadigt material som ger stöd och kompression. Lämplig vid bråckproblematik. Fästytans kardborreband är elastiska vilket gör att gördeln formar sig fint. Stadigt material som håller formen utan att vecka sig. Den långa fästytan gör gördeln flexibel i omfångsmått och kan justeras för mer eller mindre kompression och stöd. Vira x2 och x3 passar för större bråck när en högre och stadigare gördel önskas. Vändbar. OEKO-TEX®. Höjd 15 cm art.nr 50230, höjd 20 cm art.nr 50231.

- ✓ Finns i 2 olika höjder



Form

Rak gördel i kraftigare elastik för stadig kompression och stöd. Lämplig vid bråckproblematik. Gördeln är enkel att applicera och försluts med kardborrlåsning. Vändbar. Finns i svart och ljusgrå. Höjd 15 cm art.nr 50209, höjd 20 cm art.nr 50220, höjd 25 cm art.nr 50204.

- ✓ Finns i 3 olika höjder





Form 20

Bråck

Stöd vid ljumsk- och pungbråck



NordiCares bråckbälten och bråckbyxor ger ett effektivt och bekvämt stöd vid ljumskbråck och pungbråck. Genom att hålla tillbaka bråcket blir vardagen lite enklare. Smärta och obehag minskar vilket gör det lättare att vara aktiv.



Balder

Smidigt och diskret ljumskbråcksbälte som ger stöd vid mindre och medelstora ljumskbråck. Det syns inte under kläderna och är enkelt att anpassa och använda. Finns för dubbelsidigt och enkelsidigt bråck. Platta pelletter medföljer. Balder Dubbel art.nr 50215-00, Balder Höger art.nr 50216-20, vänster art. nr 50216-10. Finns i storlek XS-XL.

✓ Används vid ljumskbråck



KOMPRESION



AVLASTNING





Loke

Stadig bråckbyxa i herrmodell. Öppningsbar gylf med kardborre. Används vid konservativ behandling av lätta till medelstora ljumskbråck, samt efter operation för snabbare mobilisering. Ger smärtlindring och förhindrar eventuella återfall. Fickor på båda sidor för isättning av pelletter. Platta pelletter medföljer. OEKO-TEX®. Art.nr 50252.


✓ Används vid ljumskbråck



Frej

En bekväm bråckbyxa i mjukt bomullsmaterial som ger stadig kompression. Lägre modell än Loke. Används vid konservativ behandling av lätta till medelstora ljumskbråck samt efter operation för smärtlindring och snabbare mobilisering samt för att förhindra eventuella återfall. Byxan är utformad med fickor på båda sidor för isättning av pelletter. Platta pelletter medföljer. OEKO-TEX®. Art.nr 50253.

✓ Används vid ljumskbråck

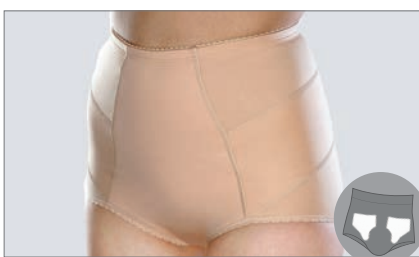

Freja

Stödjande bråckbyxa i dammodell med öppning i grenen. Ger optimalt stöd vid ljumskbråck och används istället för vanliga trosor. Byxan har olika kompressionszoner för att ge optimalt stöd där det behövs. Kan även användas vid mindre bukbråck, även postoperativt eller vid stomi. Fickor för pelletter. Platta pelletter medföljer. OEKO-TEX®. Art.nr 50254.

✓ Används vid ljumskbråck



Tor

Stadig bråckbyxa i herrmodell. Används vid konservativ behandling av lätta till medelstora pungbråck. Även lämplig efter bukoperation för smärtlindring och snabbare mobilisering. Kan även användas vid mindre bukbråck, även postoperativt eller vid stomi. OEKO-TEX®. Art.nr 50256.

✓ Används vid pungbråck



Vidar

Diskret suspensoar i mjukt bomullsmaterial. Används vid pungbråck eller som stöd efter operation. Designad utan skavande sömmar för bästa komfort. OEKO-TEX®. Art.nr 50251.

✓ Används vid pungbråck



Pads och PadPlus

Konvexa pelletter kan läggas i fickorna på Loke, Frej, Freja och Balder för ökat tryck. Dessa kan ersätta de platta pelletterna som medföljer. Pads är packade i par, en höger och en vänster och finns i large och medium. Art.nr 50257. PadPlus är packade enskilt för höger respektive vänster sida och finns i en universal storlek. Art.nr 50258.

Ljumskbråck är vanligt och drabbar en av fyra män någon gång i livet. Bråcket opereras nästan alltid, men i väntan på operation eller för konservativ behandling rekommenderas användning av bråckbälte eller bråck-

byxa. Våra diskreta bälten håller bråcket på plats vid aktivitet och kan enkelt justeras under dagen. Bråckbyxa är ibland enklare att använda och ger bättre passform för vissa kroppstypen samt extra stöd för buken.

Storlekar och mått

Det ska vara enkelt att hitta rätt storlek. Genom att ta ett eller två mått vet du vilken storlek som passar. De flesta av våra gördlar är flexibla i omfång, vilket gör att passformen på gördeln kan anpassas och utprovnigen förenklas. Vi rekommenderar att måtten tas direkt på krop-

pen. När "tänkt placering" anges i måtttabellen ska måttet tas där gördeln är tänkt att sitta. Till exempel tas måttet över stomin om du önskar prova ut en stomigördel eller över bröstkorgen om du vill prova ut en gördel efter thoraxkirurgi eller bröstreduktion vid gynekomasti.

A. Måtttagning vid tänkt placering cm


Ta ett stramt omkretsmått på det bredaste stället där det är tänkt att gördeln ska sitta.

B. Måtttagning midjemått cm

Ta ett stramt midjemått kring den smalaste delen av midjan.

C. Måtttagning höftmått cm

Ta ett stramt omkretsmått runt höften på det bredaste stället.

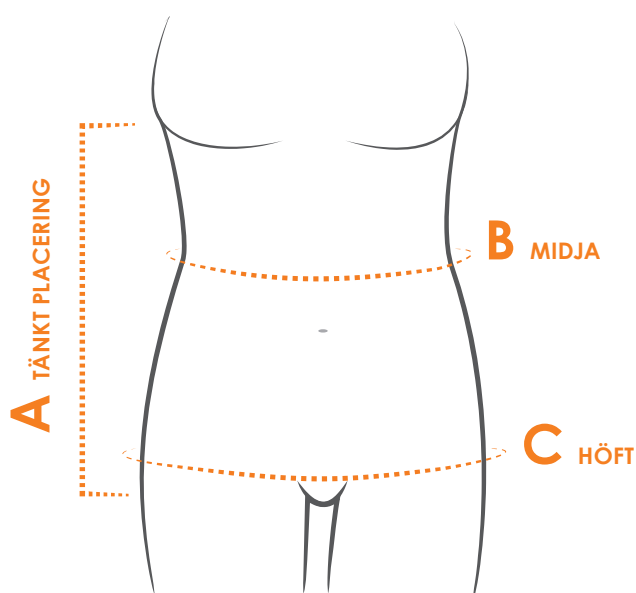

StomiFix/StomiTube	
Storlek	Höftmått (C)
X Small-Small	65 - 90 cm
Small-Medium	85 - 110 cm
Medium-Large	105 - 125 cm
Large-X Large	120 - 140 cm

StomiMini	
Storlek	Höftmått (C)
Universal	Max 120 cm

Stomisoft	
Storlek	Mått placering (A)
X Small	70-85 cm
Small	80-95 cm
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm

Figur	
Storlek	Mått placering (A)
X Small	65-85 cm
Small	80-95 cm
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm
3X Large	130-145 cm

StomiBas	
Storlek	Mått placering (A)
X Small	70-85 cm
Small	80-95 cm
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm
3X Large	130-145 cm
4X Large	140-155 cm

AbdoBas*/Smidig	
Storlek	Mått placering (A)
X Small	60-75 cm
Small	70-85 cm
Medium	80-100 cm
Large	95-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm
3X Large*	130-145 cm

Form	
Storlek	Höftmått (C)
Small	70-85 cm
Medium	80-95 cm
Large	90-105 cm
X Large	100-115 cm
2X Large	110-125 cm

ViraRak (endast höftmått)/Vira x2**/Vira x3/ViraKing*		
Storlek	Höftmått (C)	Midja (B)
XX Small**	65-80 cm	50-65 cm
X Small	70-90 cm	60-80 cm
Small	80-100 cm	70-90 cm
Medium	90-110 cm	80-100 cm
Large	100-120 cm	90-110 cm
X Large	110-130 cm	100-120 cm
2-3X Large*	120-150 cm	110-140 cm

AbdoCare	
Storlek	Mått placering (A)
1	75-100 cm
2	95-120 cm
3	115-140 cm
4	140-190 cm
5	190-240 cm

Lyft	
Storlek	Höftmått (C)
Small	80-95 cm
Medium	95-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm

LyftPlus Stomi/Comfort	
Storlek	Höftmått (C)
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm
3X Large	130-145 cm
4X Large	140-155 cm

LyftPlus Special	
Storlek	Höftmått (C)
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm

Mika	
Storlek	Mått placering (A)
S/M	65 - 115 cm
L/XL	110 - 145 cm

Loke/Tor	
Storlek	Höftmått (C)
02	76-80 cm
03	81-85 cm
04	86-90 cm
05	91-95 cm
06	96-100 cm
07	101-105 cm
08	106-110 cm
09	111-115 cm
10	116-120 cm

Frej	
Storlek	Höftmått (C)
02	76-80 cm
03	81-85 cm
04	86-90 cm
05	91-95 cm
06	96-100 cm
07	101-105 cm
08	106-110 cm



Freja	
Storlek	Midjemått (B)
02	65-69 cm
03	70-74 cm
04	75-79 cm
05	80-84 cm
06	85-89 cm
07	90-94 cm
08	95-99 cm

Balder	
Storlek	Höftmått (C)
X Small	70-85 cm
Small	80-95 cm
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm

Vidar	
Storlek	Höftmått (C)
X Small	70-80 cm
Small	81-90 cm
Medium	91-102 cm
Large	103-113 cm
X Large	114-124 cm



NordiCare Ortopedi & Rehab AB är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför noga utvalda ortopedi-, postop- och rehabprodukter. En central del i NordiCares produktutveckling är funktion och användarvänlighet. Vår drivkraft är att ta fram funktionella produkter i tilltalande design som gör vardagen enklare för såväl användare som den medicinska professionen.

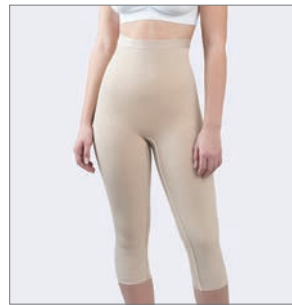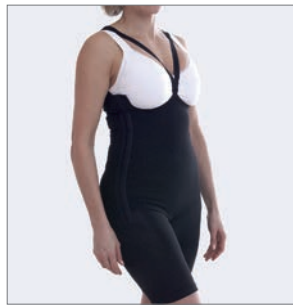

NordiCare[®] +