

# HumerusComfort Collum armslinga

Bekväm och trygg  
med breda band

Proximal humerusfraktur

Ger smärtlindring

Positionerar och håller  
i anatomisk viloposition




**NordiCare**<sup>®</sup> 

# Avlastar proximala humerusfrakturer

**HumerusComfort Collum** är en armslinga med funktion att fixera och avlasta axelleden. Genom att axelleden positioneras i en så avlastad position som möjligt, med liten påverkan av axelledens muskulatur på benfragment, uppnås god läkförmåga och smärtlindring.

Används vid icke operativ behandling av proximala humerusfrakturer istället för "vanlig" armslinga.

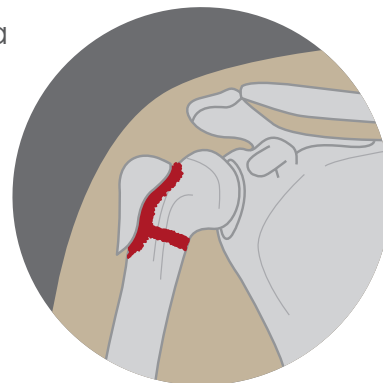


## Positioner för maximal avlastning av axelleden



Abduktion 30 grader.



Elevation 40 grader.

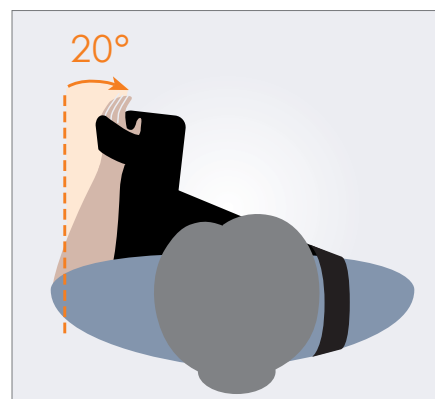

Inåtrotation 20 grader.


- ✓ Banden går att klippas kortare vid behov
- ✓ Kommer färdigmonterad för höger eller vänster arm
- ✓ Lätt att öppna vid rehabilitering

HumerusComfort Collum	
Storlek	Art.no.
Universal vänster	20225-10-50
Universal höger	20225-20-50



## Ersätter kuddar och traditionella slingor

Proximala humerusfrakturer innebär mycket smärta, många gånger svårsläkt fraktur, en lång jobbig rehabilitering och vardag med endast klippt slinga som stöd. I jämförelse med traditionell slinga positionerar HumerusComfort Collum den brutna axeln i ett anatomiskt viloläge där utrymmet i axelleden är som störst. Den positionen ger smärtlindring och avlastning hela dygnet på samma sätt som olika kombinationer av kuddar kan göra i liggande och sittande position. Fördelen med HumerusComfort Collum är att den även ger smärtlindring och stöd i stående och sitter alltid tryggt på plats utan att glida.

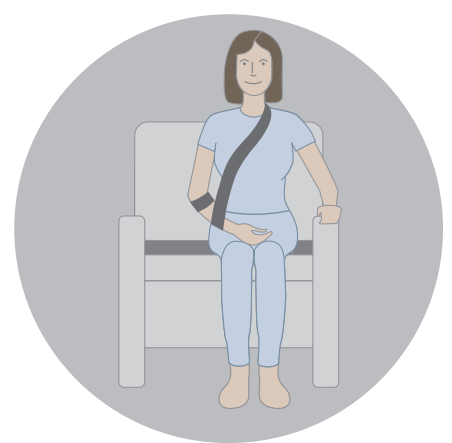

Slingor och kuddar kan ge ett visst stöd och smärtlindring, men med HumerusComfort Collum får man tryggare och mer flexibel hjälp.



**HumerusComfort Collum:**

- ✓ Trygg och smärtlindrad patient
- ✓ Aktiv patient med goda förutsättningar för läkning

**I jämförelse med traditionell behandling med klippt slinga**

- ✓ Smärtlindrar hela dygnet
- ✓ Sitter tryggt på plats och glider ej



# HumerusComfort-familjen


I HumerusComfort-familjen ingår frakturortoser och armslingor som behandlar olika delar av humerus. De medger rörlighet i såväl axel som armbågsled, vilket gör att risken för komplikationer som svullnad, ledstelhet och muskelatrofi under behandlingstiden minskar. Breda cirkulära band, tillsammans med integrerade formgjutna plattor, ger jämn kompression och god stabilitet.

- ✓ **Stabila, bekväma och trygga**
- ✓ **Möjliggör en aktiv vardag**
- ✓ **Ger cirkulär jämn kompression**
- ✓ **Är enkla att individanpassa**



## HumerusComfort & Humerus Comfort Extend - Frakturortos

Stabil frakturortos designad för att kontrollera humerussegment genom kompression av mjukdelarna. Används vid icke operativ behandling av slutna skaffraktur på humerus och vid postoperativ behandling av öppna skaffraktur på humerus. Ger smärtlindring och tillåter rörelse i axelled och armbågsled. Breda band och formgjutna plattor bidrar till jämn kompression och god avlastning. Den textila axeldelen gör att ortosen sitter bekvämt och säkert på plats. Integrerade formgjutna plattor ger stabilitet. Passar både höger och vänster arm. Finns i svart och S-XL. Art.nr 20220 och 20224.

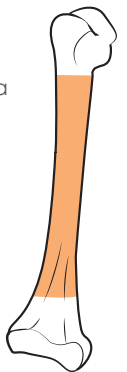


- ✓ **Standardortos för diafysära frakturer**



## CubitiComfort - Frakturortos

Stabil och bekväm helarmsortos som används vid frakturbehandling och eller rehabilitering av arm- och armbågskirurgi. Ortosen är individuellt anpassningsbar och lindrar smärta samt medger rörlighet i axel- och armbågsled. Flexion eller extension i armbågsleden kan justeras i intervall om 15° och låses i önskat läge. Breda cirkulära band tillsammans med formgjutna plattor ger jämn kompression och avlastning. Textil axeldel gör att ortosen sitter bekvämt och säkert på plats. Längden kan justeras steglöst. Passar både höger och vänster arm. Finns i vit och S-XL. Art.nr 20222.

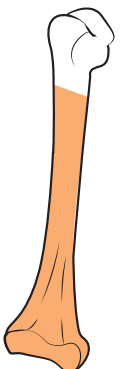


- ✓ **Ökad kontroll av fraktur och rörlighet**



## HumerusComfort Collum - Armslinga

Armslinga med funktion att avlasta och positionera axelleden. Genom att axelleden positioneras i en så avlastad position som möjligt, med liten påverkan av axelledens muskulatur, uppnås goda förutsättningar för läkning och smärtlindring. Används vid proximala humerusfrakturer istället för "vanlig" armslinga. Finns för höger och för vänster arm i universal storlek. Art.nr 20225.

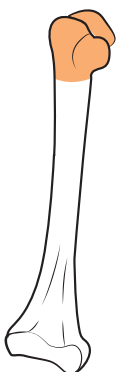

- ✓ **Smärtlindring och positionering i avlastat läge**