

## Patientinformation

### Antibiotika infusioner med Homepump

Homepump är en engångs infusionspump. Pumpen drivs av det tryck som skapas när den fylls med en lösning. Flödeshastigheten är konstant och pumpen behöver inte hänga högt, utan kan läggas i tillhörande väska eller fästas på kläderna med tillhörande clip.

#### Inkoppling av pumpen:

- Rengör händerna noggrant och utför anslutningen av pumpen på ett rent underlag, undvik att ta på de delar som skall kopplas ihop.
- Ta bort ändproppen.
- Öppna slangklämman, fyll slangen och stäng klämman. Det är viktigt att det inte finns några luftbubblor i slangen.
- Anslut slangen till kanylen eller motsvarande.
- Öppna slangklämman, infusionen startas.




#### Viktigt att tänka på:

- Kontrollera att slangen inte ligger i kläm.
- Undvik att filtret kommer i kontakt med tvål eller alkohol då det ger risk för läckage.
- Slangen bör ligga utanpå kläderna då den är kalibrerad för rumstemperatur.
- Pumpen tål att tappas i golvet.
- Inspektera huden runt omkring infartskanylen dagligen.  
*Vid rodnad, smärta, svullnad eller läckage, stäng av pumpen med slangklämman och kontakta sjukhuset.*

#### Efter avslutad infusion:

- Stäng slangklämman.
- Stäng trevägskran eller motsvarande.
- Koppla bort slangen.
- Spola kranen eller motsvarande med Natriumklorid.
- Återförslut kanyl eller motsvarande.
- Använda pumpar slängs med brännbart avfall.

*Vid kyl- el. frysförvaring: Ta ut pumpen så att den är rumstempererad vid anslutning (6-30 timmar beroende på storlek och förvaring).*

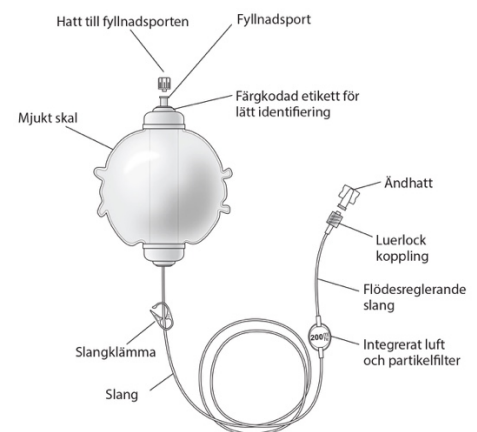

Om det skulle uppstå några problem eller om Du har några frågor är Du välkommen att ringa på tfn: .....